



OPERATION INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE EMPLEO
ISTRUZIONI PER L'USO
BRUKSANVISNING

SWISS DOLORCLAST[®] smart

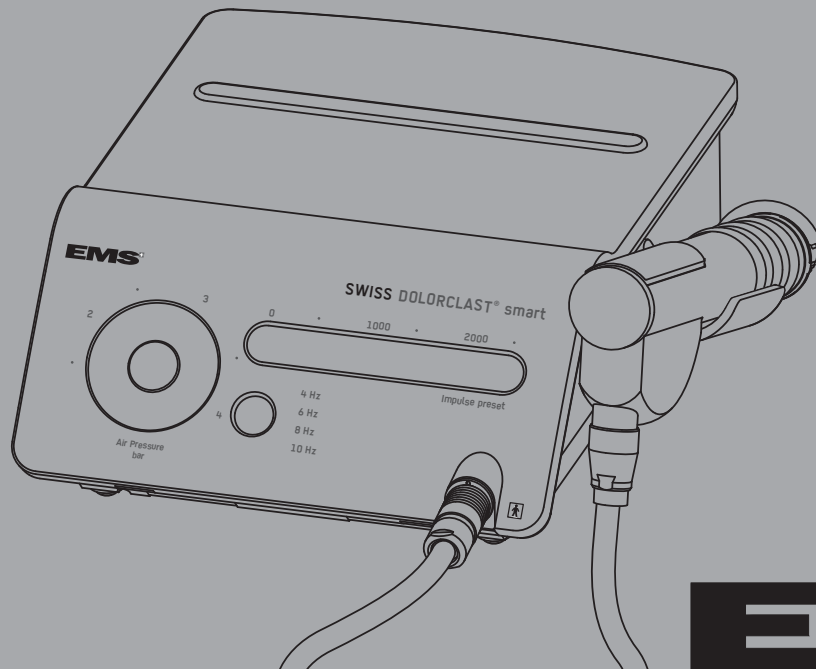

Rx ONLY Caution! Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

EMS 
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

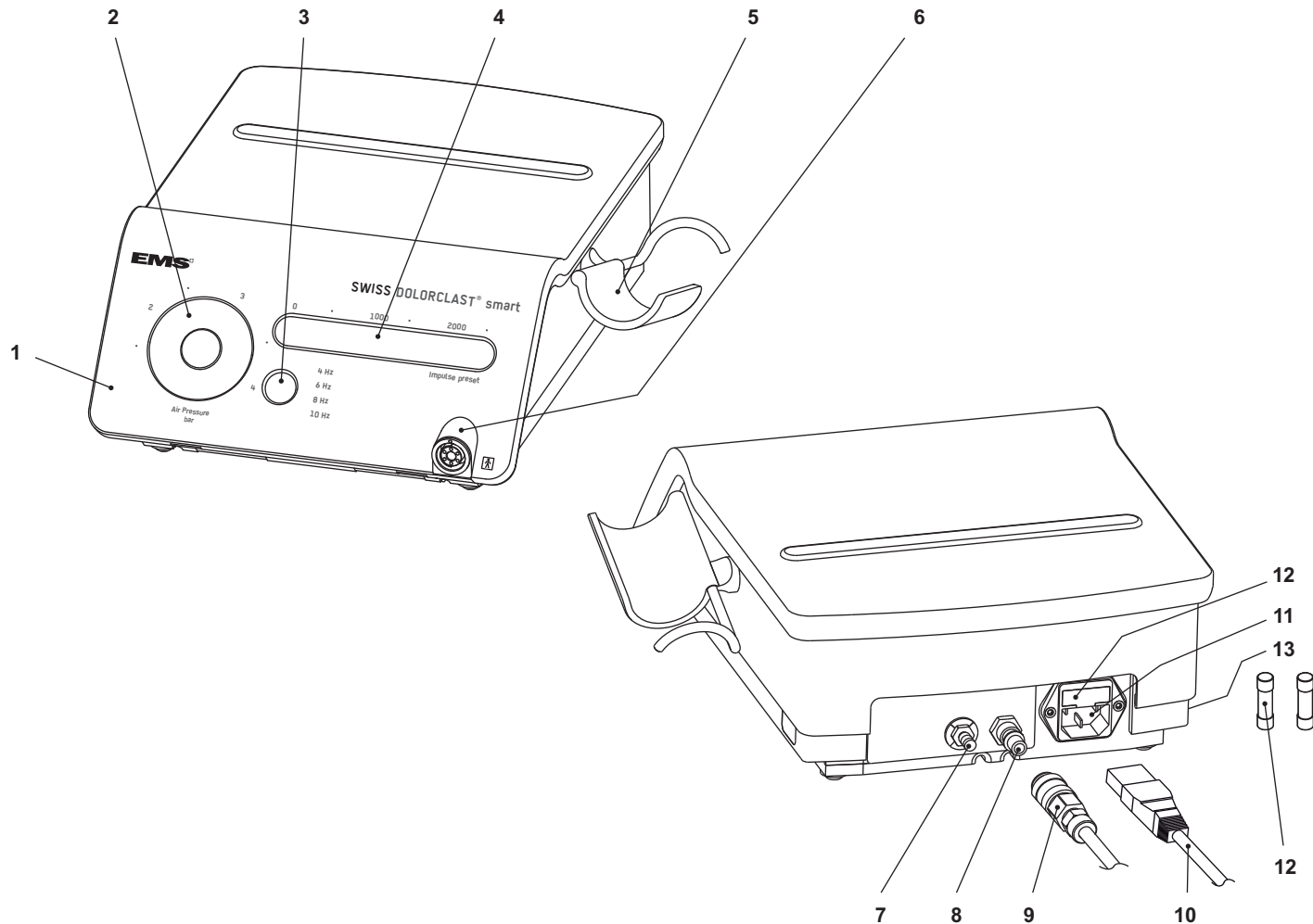

COMPONENTS

- 1 Unit
- 2 Adjustment of working pressure
- 3 Frequency switch
- 4 Adjustment of number of pulses
- 5 Handpiece holder
- 6 Connector for the handpiece
- 7 Equipotential connector
- 8 Air hose connector
- 9 Compressed air tube
- 10 Mains power cord
- 11 Power socket
- 12 Fuses
- 13 Power switch

EMS supplies units with various accessories. The "Packing list" shows exactly what your unit includes.

COMPONENTES

- 1 Aparato
- 2 Ajuste de la presión de trabajo
- 3 Interruptor de frecuencia
- 4 Ajuste del número de impulsos
- 5 Soporte del mango
- 6 Conector para el mango
- 7 Racor equipotencial
- 8 Conector para la manguera de aire
- 9 Tubo para el aire comprimido
- 10 Cable de alimentación eléctrica
- 11 Enchufe de potencia
- 12 Fusibles
- 13 Interruptor de alimentación eléctrica principal

EMS ofrece este aparato con diferentes variantes de equipamiento. Para información sobre el equipamiento exacto de su aparato, consulte por favor el "Packing list" de contenido adjunto.

COMPOSANTS

- 1 Appareil
- 2 Réglage de la pression de travail
- 3 Sélection de fréquence
- 4 Réglage du nombre d'impulsions
- 5 Support de la pièce à main
- 6 Connecteur pour la pièce à main
- 7 Connecteur équipotentiel
- 8 Raccord pour l'alimentation air
- 9 Tuyau d'alimentation air
- 10 Cordon secteur
- 11 Prise d'alimentation secteur
- 12 Fusibles
- 13 Interrupteur général

EMS fournit cet appareil avec différents accessoires. La "Packing list" détaille exactement ce qui est inclus avec votre appareil.

COMPONENTI

- 1 Unità
- 2 Regolazione della pressione di esercizio
- 3 Interruttore di frequenza
- 4 Regolazione del numero degli impulsi
- 5 Supporto manipo
- 6 Connettore per il manipo
- 7 Connettore equipotenziale
- 8 Connettore del tubo dell'aria
- 9 Tubo dell'aria compressa
- 10 Cavo di alimentazione
- 11 Presa di alimentazione
- 12 Fusibili
- 13 Interruttore di alimentazione

EMS mette a disposizione unità con vari accessori. Nella distinta vengono elencati esattamente gli accessori acclusi nell'unità.

BESTANDTEILE

- 1 Gerät
- 2 Arbeitsdruckregler
- 3 Frequenzta
- 4 Einstellung der Impulszahl
- 5 Handstückhalter
- 6 Anschluss für Handstück
- 7 Anschluss Potenzialausgleich
- 8 Anschluss für Luftschlauch
- 9 Druckluftschlauch
- 10 Netzkabel
- 11 Anschluss für Netzkabel
- 12 Sicherungen
- 13 Netzschalter

EMS bietet Geräte in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an. Für die genaue Ausstattung Ihres Geräts beachten Sie bitte die beiliegende „Packing list“.

KOMPONENTER

- 1 Enhet
- 2 Reglage av arbetstryck
- 3 Frekvensbrytare
- 4 Reglage för pulsantal
- 5 Hållare för handenhet
- 6 Anslutning för handenhet
- 7 Ekvipotentie
- 8 Luftslangsanslutning
- 9 Tryckluftsbehållare
- 10 Nätsladd
- 11 Nätuttag
- 12 Säkringar
- 13 Strömbrytare

Den bifogade listan ("Packing list") visar exakt vilken utrustning som ingår till din enhet.

DEAR CUSTOMERS,

Thank you for buying a new EMS product. It meets the highest quality and safety standards.

The following indications have been successfully treated with the EMS Swiss DolorClast:

- Calcifying tendinitis of the shoulder
- Subacromial pain syndrome
- Tennis elbow (epicondylitis humeri radialis)
- Greater trochanteric pain syndrome
- Patella tip syndrome
- Rugby knee (Osgood-Schlatters disease)
- Medial tibial stress syndrome
- Insertional Achilles tendinopathy
- Midbody Achilles tendinopathy
- Plantar fasciitis (or fasciopathy)
- Myofascial pain syndrome (trigger point therapy), idiopathic low back pain and pseudoradicular syndromes
- Peyronie's disease (induratio penis plastica)
- Acute and chronic soft-tissue wounds (including diabetic foot ulcers)
- Primary and secondary lymphedema
- Cellulite

Several scientific publications and empirical reports have proven clinical efficacy and safety of the EMS Swiss DolorClast method for these indications.

CHERS CLIENTS,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de ce nouveau produit EMS. Il répond aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité.

Les indications suivantes sont traitées avec succès avec le Swiss DolorClast d'EMS:

- Tendinite calcifiante de l'épaule
- Impingement syndrome de l'épaule
- Tennis elbow (épicondylite latérale)
- Syndrome douloureux du grand trochanter
- Syndrome de la pointe rotulienne
- Apophysose tibiale antérieure (maladie d'Osgood-Schlatters)
- Syndrome tibial
- Tendinopathie calcanéenne
- Tendinopathie corporelle
- Aponévrosite plantaire
- Syndrome myofascial douloureux (thérapie des points trigger), douleur lombaire idiopathique et syndromes pseudoradiculaires
- Maladie de La Peyronie (induration plastique des corps caverneux du pénis)
- Lésions aiguës et chroniques des tissus mous (ulcères du pied diabétiques compris)
- Lymphoedème primaire et secondaire
- Cellulite

Plusieurs publications scientifiques et rapports empiriques ont démontré l'efficacité clinique et la sécurité de la méthode Swiss DolorClast d'EMS sur ces symptômes.

SEHR GEEHRTE KUNDEN,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen EMS Produkts. Es erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit.

Mit dem EMS Swiss DolorClast folgende Indikationen erfolgreich behandelt werden:

- Tendinosis calcarea der Rotatorenmanschette
- Subacromiales Schmerzsyndrom
- Tennisellbogen (Epicondylitis humeri radialis)
- Schmerzsyndrom des Trochanter major
- Patellaspitzensyndrom
- Morbus Osgood-Schlatter
- Mediales Tibia-Stresssyndrom
- Ansatz-tendinopathie der Achillessehne
- Tendinopathie der Achillessehne
- Plantarfasziitis (oder Plantarfasziopathie)
- Myofaszielles Schmerzsyndrom (Triggerpunktbehandlung), idiopathischer Rückenschmerz und pseudoradikuläres Schmerzsyndrom
- Induratio penis plastica
- Akute und chronische Wunden des Weichgewebes (einschliesslich diabetischer Fussulcera)
- Primäre und sekundäre Lymphödeme
- Zellulitis

Mehrere wissenschaftliche Publikationen und Erfahrungsberichte belegen die Wirksamkeit und Sicherheit der Methode EMS Swiss DolorClast bei diesen Krankheitsbildern.

ESTIMADOS CLIENTES,

Les felicitamos por la adquisición de su nuevo producto EMS, que satisface las exigencias más altas de calidad y seguridad.

Con el Swiss DolorClast de EMS se tratan con éxito las siguientes afecciones:

- Tendinitis calcificante del hombro
- Síndrome subacromial doloroso
- Codo de tenista (epicondilitis lateral)
- Síndrome doloroso del trocánter mayor (bursitis trocantérica)
- Síndrome de la tendinitis rotuliana
- Osteocondritis de la tuberosidad tibial anterior (enfermedad de Osgood-Schlatters)
- Síndrome de estrés medial de la tibia
- Tendinopatía aquilea insercional
- Tendinopatía aquilea del tercio medio
- Fascitis plantar
- Síndrome miofascial doloroso (terapia de puntos gatillo), lumbalgia idiopática y síndromes pseudoradiculares
- Enfermedad de Peyronie (induración plástica y dolorosa de los cuerpos cavernosos del pene)
- Lesiones agudas y crónicas del tejido blando (incluidas las úlceras del pie diabético)
- Linfedema primario y secundario
- Celulitis

Numerosas publicaciones científicas e informes empíricos han demostrado la eficacia clínica y la seguridad del método EMS Swiss DolorClast para el tratamiento de las indicaciones mencionadas.

GENTILE CLIENTE,

Grazie per aver acquistato un nuovo prodotto EMS. Questo sistema soddisfa gli standard di qualità e di sicurezza più elevati.

Con EMS Swiss DolorClast sono state trattate con successo le seguenti indicazioni:

- Tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Gomito del tennista (epicondilitis omero-radiale)
- Sindrome dolorosa del grande trocantere
- Tendinopatia inserzionale rotulea
- Osteocondrosi del ginocchio/osteocondrosi dell'apofisi tibiale anteriore (sindrome di Osgood-Schlatters)
- Periostite tibiale (sindrome mediale della tibia)
- Tendinite inserzionale dell'achilleo
- Tendinopatia dell'achilleo
- Fascite plantare
- Dolore miofasciale (punti trigger), lumbalgia idiopatica e sindrome pseudo radicolare
- Morbo de La Peyronie (induratio penis plastica IPP)
- Piaghe cutanee acute e croniche (incluse le ulcere diabetiche)
- Linfedema primario e secondario
- Cellulite

Numerose pubblicazioni scientifiche e rapporti empirici hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza clinica del metodo EMS Swiss DolorClast per queste indicazioni.

BÄSTE KUND,

Tack för att du valde en ny EMS-produkt. Den uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Följande indikationer har framgångsrikt behandlats med EMS Swiss DolorClast:

- Kalkaxel
- Subakromialt smärtsyndrom
- Tennisarmbåge (lateral epikondylit)
- Smärtsyndrom i trochanter major
- Patellaapexsyndrom
- Osgood-Schlatters sjukdom
- Medialt tibia stress syndrom
- Achillestendinopati i senfästet
- Achillestendinopati
- Plantarfascit
- Myofasciellt smärtsyndrom (behandling av triggerpunkter), idiopatisk ryggsmärta och pseudoradikulära syndrom
- Peyronies sjukdom (induratio penis plastica)
- Akuta och kroniska sår i mjukvävnad (inklusive diabetiska fotsår)
- Primärt och sekundärt lymfödem
- Cellulit

Flera vetenskapliga publikationer och empiriska rapporter har visat att EMS Swiss DolorClast-metoden är kliniskt effektiv och säker vid dessa indikationer.

Contraindications:

- Treatment over air-filled tissue (lung, gut)
- Treatment of pre-ruptured tendons
- Treatment of pregnant women
- Treatment of patients under the age of 18 (except for the treatment of Osgood-Schlatters disease)
- Treatment of patients with blood-clotting disorders (including local thrombosis)
- Treatment of patients treated with oral anticoagulants
- Treatment of tissue with local tumors or local bacterial and/or viral infections
- Treatment of patients treated with cortisone

Risks:

- Pain and discomfort during and after treatment (anesthesia is not necessary)
- Reddening of the skin
- Petechia
- Swelling and numbness of the skin over the treatment area
- Potential damage of lung and gut tissue
- Potential rupture of pre-ruptured tendons
- Potential damage of immature epiphyses
- Possible dissemination of malignant tumors
- Potential damage of articular cartilage

Contre-indications:

- Application sur le parenchyme pulmonaire et le tractus digestif
- Application sur des tendons en phase de pré-rupture
- Traitement de femmes enceinte
- Traitement des patients âgés de moins de 18 ans (excepté le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatters)
- Traitement des patients souffrant d'insuffisance coagulatoire (thrombose locale comprise)
- Traitement des patients sous traitement anticoagulant
- Application sur des tissus infectés par des tumeurs locales ou des infections bactériennes et/ou virales
- Traitement des patients sous traitement à base de cortisone

Risques:

- Douleur et inconfort pendant et après le traitement (anesthésie pas indispensable)
- Rougeurs de la peau
- Pétéchies
- Gonflement et engourdissement au niveau de la zone traitée
- Risque possible au niveau du parenchyme pulmonaire et du tractus digestif
- Rupture éventuelle des tendons en phase de pré-rupture
- Risque possible sur la croissance de l'enfant par atteinte des épiphyses immatures
- Dissémination éventuelle de tumeurs malignes
- Risque d'atteinte du cartilage

Gegenanzeigen:

- Behandlung über luftgefülltem Gewebe (Lunge, Darm)
- Behandlung angerissener Sehnen
- Behandlung von Schwangeren
- Behandlung von Personen unter 18 Jahren (Ausnahme: Behandlung des Morbus Osgood-Schlatter)
- Behandlung von Patienten mit Blutgerinnungsstörungen (einschliesslich lokaler Thrombosen)
- Behandlung von Patienten, die mit oralen Antikoagulantien behandelt werden
- Behandlung von Geweben mit lokalen Tumoren oder lokalen bakteriellen und viralen Infektionen
- Behandlung von Patienten, die mit Kortison behandelt werden

Risiken:

- Schmerz und Missempfinden während und nach der Behandlung (Anästhesie ist jedoch nicht erforderlich)
- Rötung der Haut
- Petechiale Blutungen
- Schwellung und Taubheit der Haut im Bereich der Behandlung
- Potenzielle Schädigung von Lunge und Darm
- Potenzielle Ruptur angerissener Sehnen
- Potenzielle Schädigung der Knochenwachstumsfugen
- Potenzielle Streuung bösartiger Tumore
- Potenzielle Schädigung des Gelenkknorpels

Contraindicaciones:

- Tratamiento sobre la cavidad torácica y abdominal
- Tratamiento de tendones con riesgo de rotura
- Tratamiento de mujeres embarazadas
- Tratamiento de pacientes menores de 18 años (a excepción del tratamiento de la enfermedad de Osgood-Schlatters)
- Tratamiento de pacientes con desórdenes de coagulación (incluida la trombosis local)
- Tratamiento de pacientes tratados con anticoagulantes
- Tratamiento de los tejidos con tumores locales o infecciones locales bacterianas y/o virales
- Tratamiento de pacientes tratados con cortisona

Riesgos:

- Dolor y malestar durante y después del tratamiento (no es necesaria anestesia)
- Enrojecimiento de la piel (eritema)
- Petequia
- Inflamación y adormecimiento de la piel en la zona tratada
- Riesgo de daño del tejido pulmonar e intestinal
- Rotura potencial de tendones con riesgo de rotura
- Daño potencial de la placa epifisaria en niños
- Posibilidad de diseminación de tumores malignos (neoplasia)
- Lesión potencial del cartilago articular

Controindicazioni

- Trattamento in presenza di tessuti contenenti gas proiettati nella zona di trattamento (polmoni, intestino)
- Trattamento di tendini lesionati a rischio di rottura (pre-rottura)
- Donne in gravidanza
- Trattamento di pazienti sotto i 18 anni di età (eccetto per osteocondrosi tibiale anteriore)
- Trattamento di pazienti con difetti della coagulazione del sangue (incluse trombosi locali)
- Trattamento di pazienti in terapia anticoagulante
- Trattamento di tessuti con presenza di tumori locali o sedi di infezioni virali o batteriche
- Trattamento di pazienti in terapia cortisonica

Rischi:

- Dolore al trattamento (anestesia non necessaria)
- Arrossamenti cutanei
- Petecchie emorragiche
- Gonfiore e sensazione di intorpidimento nell'area trattata
- Potenziale danno a polmoni e intestino
- Potenziale rottura di tendini in fase di pre-rottura
- Potenziale danno alle epifisi in accrescimento
- Rischio di disseminazione di tumori maligni
- Danni potenziali della cartilagine articolare

Kontraindikationer:

- Behandling över luftfylld vävnad (lunga, tarm)
- Behandling av partiell ruptur av sena
- Behandling av gravida kvinnor
- Behandling av patienter under 18 år (förutom behandling av Osgood-Schlatters sjukdom)
- Behandling av patienter med koagulations-sjukdomar (inklusive lokal trombos)
- Behandling av patienter som behandlas med orala antikoagulantia
- Behandling av vävnad med lokala tumörer eller lokala bakterie- och/eller virusinfektioner
- Behandling av patienter som behandlas med kortison

Risker:

- Smärta och obehag under och efter behandling (anestesi är inte nödvändigt)
- Rodnad på huden
- Petekier
- Svullnad och domningar i huden över behandlingsområdet
- Potentiell skada på lung- och tarmvävnad
- Potentiell partiell ruptur av degenerativa senor
- Potentiell skada på omogna epifyser
- Potentiell spridning av maligna tumörer
- Potentiell skada på ledbrosk

ABOUT THIS MANUAL

Note that the English version of this manual is the master from which translations derive. In case of any discrepancy, the binding version is the English text.

These operating instructions are to ensure the correct installation and use of this product.

Please read these operating instructions carefully as they explain all the most important details and procedures. Please pay special attention to the safety precautions.

Always keep these instructions close at hand.

To prevent injury to people and damage to property, please take note of the relevant warnings and remarks. They are marked as follows:



Danger
Risk of injury



Caution
Risk of property damage or environmental harm



Please note
Useful additional information and hints



Prohibited



Authorized

A PROPOS DE CE MANUEL

Les traductions dans ce manuel sont basées sur sa version anglaise. Ainsi le texte en anglais fera référence en cas de divergence.

Ce mode d'emploi est destiné à l'installation et à l'utilisation correcte de ce produit.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi car tous les détails et tous les gestes importants y sont clairement décrits. Respectez en particulier les remarques concernant la sécurité.

Veillez conserver ces documents toujours à portée de main.

Pour prévenir les accidents corporels et matériels, tenez compte des directives correspondantes. Elles sont identifiées par:



Danger
Risque d'accident corporel



Attention
Risque d'accident matériel ou risque pour l'environnement



Remarques
Informations complémentaires utiles et tours de main



Interdit



Autorisé

ZU DIESEM HANDBUCH

Es wird darauf hingewiesen, dass das englische Original der Bedienungsanleitung als Vorlage für alle Übersetzungen gilt. Bei eventuellen Abweichungen ist der englische Text bindend.

Die Bedienungsanleitung soll Ihnen bei der korrekten Installation und Bedienung des Produkts helfen.

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, da die wesentlichen Einzelheiten und Handgriffe anschaulich erklärt werden. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Unterlagen immer griffbereit auf.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie bitte die entsprechenden Warnhinweise und Anmerkungen. Sie sind gekennzeichnet mit:



Gefahr
Bei Gefahr von Personenschäden



Achtung
Bei drohenden Sach- und Umweltschäden



Hinweis
Bei nützlichen Zusatzinformationen und Anwendungstipps



Verboten



Erlaubt

ACERCA DE ESTE MANUAL

La versión original de este manual está escrita en inglés. En caso de cualquier discrepancia con alguna traducción a otro idioma distinto, prevalecerá lo indicado en el texto original.

Estas instrucciones de empleo pretenden garantizar la correcta instalación y utilización de este producto.

Por este motivo rogamos que lea atentamente las instrucciones de empleo, que describen de forma clara todos los detalles y operaciones esenciales. Preste atención especialmente a los consejos de seguridad.

Conserve este documento siempre a mano.

Para evitar daños personales y materiales, rogamos que tenga en cuenta las siguientes observaciones, identificadas con:



Advertencia

Riesgo de daños personales



Precaución

Riesgo de daños materiales o medio-ambientales



Observación

Informaciones adicionales útiles y consejos prácticos



Prohibidas



Permitidas

INFORMAZIONI SUL MANUALE

La versione inglese di questo manuale è la versione master da cui derivano le traduzioni. In caso di eventuali discrepanze, fa fede il testo in inglese.

Le presenti istruzioni per l'uso consentono l'installazione e l'utilizzo corretti di questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso in cui sono illustrati tutti i dettagli e le procedure più importanti. Porre un'attenzione particolare alle precauzioni di sicurezza.

Tenere sempre queste istruzioni a portata di mano.

Per prevenire lesioni a persone e danni alla proprietà, porre attenzione alle relative avvertenze e note che sono identificate nel seguente modo:



Pericolo

Rischio di lesione



Attenzione

Rischio di danni alla proprietà o rischio ambientale



Nota

Ulteriori informazioni e consigli utili



Vietato



Autorizzato

OM DENNA BRUKSANVISNING

Observera att den engelska versionen av denna bruksanvisning utgör det original från vilket översättningarna är gjorda. Skulle skillnader förekomma, är det den engelska texten som är bindande.

Denna bruksanvisning avser korrekt installation och användning av denna produkt.

Vi ber dig att läsa dessa instruktioner noga då de förklarar de allra viktigaste förfaranden och olika användningsdetaljer. Vi ber dig även att vara extra uppmärksam på de olika säkerhetspunkterna.

Ha gärna denna bruksanvisning nära till hands.

För att undvika person- och egendomsskador ber vi dig att vara uppmärksam på varningsymbolerna. De ser ut enligt följande:



Fara

När människor kan komma till skada



Akta

Risk för egendoms- och miljökada



Notera

Användbar tilläggsinformation samt tips



Förbjudet



Tillåtet

We would be pleased to answer your questions or listen to your suggestions. We do, of course, provide support in case of technical problems. Please call your approved EMS repair center or contact your dealer directly.

We wish you lots of success!

EMS

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et nous sommes à l'écoute de vos éventuelles suggestions. Naturellement, nous vous proposons un soutien technique en cas de problèmes. Veuillez contacter directement votre centre de réparation agréé EMS ou votre distributeur.

Avec nos meilleurs vœux de succès!

EMS

Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung, sind Ihnen aber auch für Anregungen sehr dankbar. Bei Problemen bieten wir Ihnen selbstverständlich technische Unterstützung an. Rufen Sie bitte direkt Ihr autorisiertes EMS-Reparaturzentrum oder Ihren Händler an.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

EMS

Estamos a su entera disposición para responder a sus preguntas, pero también para atender sugerencias. En caso de problemas le ofrecemos naturalmente nuestro apoyo técnico. Por favor, llame directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS o a su distribuidor.

¡Le deseamos mucho éxito!

EMS

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali domande e i suggerimenti sono bene accettati. Ovviamente, in caso di problemi tecnici è prevista la nostra assistenza. Telefonare direttamente al centro di assistenza EMS autorizzato o rivolgersi al proprio rivenditore.

Buon lavoro!

EMS

Vi svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter. Självklart står vi till hjälp tekniskt vid eventuella problem. Kontakta i så fall vårt EMS-godkända serviceställe eller din försäljare.

Vi önskar dig lycka till!

EMS

CONTENTS

Installation	2
Connecting to the mains power	2
Connecting to the compressed air supply.....	4
Operating the unit	6
Connecting the handpiece	6
Switching On.....	8
Selecting the frequency.....	10
Setting the pressure	12
Presetting the number of pulses	14
Using the Swiss DolorClast smart	16
Cleaning and disinfecting.....	18
Cleaning the unit.....	18
Cleaning the handpiece.....	20
Maintenance.....	22
Fuses	22
Error mode.....	24
Display of software version	26
Safety precautions	28
Storing the product	30
Product disposal	32
Warranty.....	32
Accessories.....	32
EMS-Service.....	34
Symbols	36
Technical data	44
Electromagnetic compatibility.....	48
Troubleshooting	50

SOMMAIRE

Installation	2
Connexion au réseau électrique	2
Connexion de l'appareil au réseau d'air comprimé.....	4
Utilisation de l'appareil	6
Connexion de la pièce à main	6
Mise sous tension.....	8
Sélection de la fréquence.....	10
Réglage de la pression.....	12
Préréglage du nombre d'impulsions.....	14
Utilisation du Swiss DolorClast smart....	16
Nettoyage et désinfection	18
Nettoyage de l'appareil.....	18
Nettoyage de la pièce à main	20
Entretien et maintenance	22
Fusibles.....	22
Mode Erreur.....	24
Affichage de la version du logiciel	26
Remarques concernant la sécurité.....	28
Rangement du produit	30
Recyclage	32
Garantie	32
Accessoires.....	32
Service EMS	34
Symboles	36
Caractéristiques techniques	44
Compatibilité électromagnétique	48
Dépannage.....	51

INHALT

Installation.....	2
Stromanschluss	2
Anschluss der Druckluftversorgung.....	4
Bedienen des Geräts	6
Anschluss des Handstücks	6
Einschalten	8
Auswahl der Frequenz.....	10
Einstellung des Drucks.....	12
Voreinstellung der Impulszahl	14
Einsatz des Swiss DolorClast smart	16
Reinigung und Desinfektion.....	18
Reinigung des Geräts.....	18
Reinigung des Handstücks.....	20
Wartung.....	22
Sicherungen	22
Fehlermodus.....	24
Anzeige der Softwareversion	26
Sicherheitshinweise	28
Aufbewahrung des Produkts	30
Entsorgung des Geräts	32
Garantie	32
Zubehör.....	32
EMS-Service.....	34
Symbole	36
Technische Daten	45
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	48
Fehlerbeseitigung	52

INDICE

Instalación.....	3
Conexión a la alimentación eléctrica	3
Conexión al suministro de aire comprimido.....	5
Uso del aparato.....	7
Conexión de la manguera para el mango 7	
Encendido.....	9
Selección de la frecuencia	11
Ajuste de la presión	13
Preestablecimiento del número de impulsos.....	15
Uso del Swiss DolorClast smart	17
Limpieza y desinfección.....	19
Limpieza del aparato	19
Limpieza del mango	21
Mantenimiento.....	23
Fusibles.....	23
Modo de error	25
Visualización de la versión del software	27
Precauciones de seguridad	29
Almacenamiento del producto	31
eliminación del producto	33
Garantía	33
Accesorios	33
Servicio técnico de EMS.....	35
Simbolos	37
Especificaciones técnicas	45
Compatibilidad electromagnética	49
Medidas a adoptar en caso de incidentes.....	53

SOMMARIO

Installazione	3
Conessione all'alimentazione di rete	3
Conessione dell'alimentazione dell'aria compressa	5
Messa in funzione dell'unità	7
Collegamento del manipolo.....	7
Accensione	9
Selezione della frequenza	11
Impostazione della pressione	13
Preimpostazione del numero di impulsi	15
Impiego del Swiss DolorClast smart	17
Pulizia e disinfezione	19
Pulizia dell'unità	19
Pulizia del manipolo.....	21
Manutenzione.....	23
Fusibili.....	23
Modalità errore	25
Visualizzazione della versione software	27
Precauzioni di sicurezza.....	29
Stoccaggio del prodotto.....	31
Smaltimento del prodotto.....	33
Garanzia.....	33
Accessori	33
Assistenza EMS.....	35
Simboli	37
Dati tecnici	46
Compatibilità elettromagnetica.....	49
Risoluzione dei problemi.....	54

INNEHÅLL

Installation.....	3
Anslutning till strömkälla.....	3
Anslutning till tryckluftsförsörjningen	5
Användning av apparaten	7
Anslutning av handdelen	7
På/Av.....	9
Inställning av frekvensen.....	11
Inställning av trycket.....	13
Förinställt pulsantal	15
Användning av Swiss DolorClast smart-enheten	17
Rengöring och desinficering	19
Rengöring av enheten	19
Rengöring av handdelen	19
Underhåll.....	23
Säkringar	23
Felläge	25
Visning av programversion.....	27
Säkerhetsföreskrifter	29
Förvaring av apparaten.....	31
Produktbortskaffning	33
Garanti	33
Tillbehör	33
EMS-service	35
Symboler	37
Tekniska data	46
Elektromagnetisk kompatibilitet.....	49
Felsökning.....	55

INSTALLATION


Connecting to the mains power

INSTALLATION

Connexion au réseau électrique

INSTALLATION

Stromanschluss

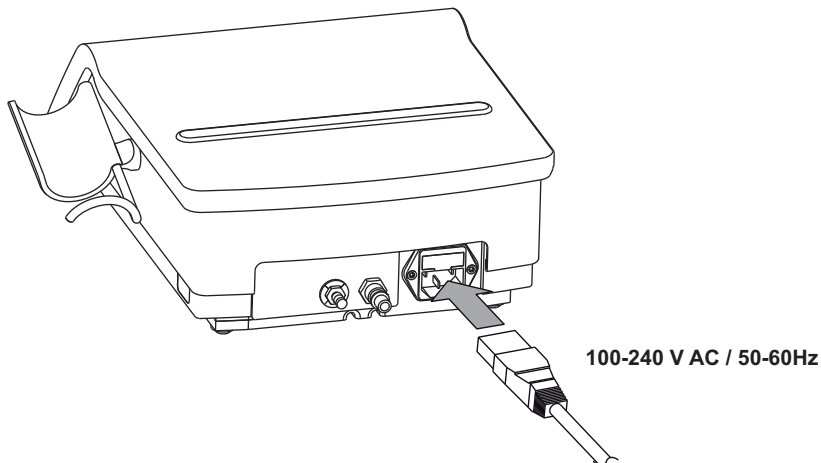

 To avoid risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.

 To prevent damage to the unit, check that its rated voltage corresponds to the local line voltage.

Use the unit only in a FI protected mains supply (FI = Residual current protection).

 Only for USA or Canada: Connect only to Hospital Grade receptacle.

 When applicable connect the equipotential plug to other medical devices used.

 Pour éviter le risque de choc électrique, cet équipement doit être connecté uniquement à un secteur avec une prise de terre.

 Pour éviter d'endommager l'appareil, vérifiez que sa tension nominale correspond bien à la tension secteur du cabinet.

Connecter l'appareil uniquement à une prise protégée par un interrupteur différentiel (protection FI).

 Seulement pour les USA ou le Canada: Branchez uniquement avec un cordon secteur Hospital Grade.

 Si applicable, brancher la prise équipotentielle aux autres appareils médicaux utilisés.

 Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Stromversorgung mit Schutzterdung angeschlossen werden.

 Die Nennspannung des Gerätes muss mit der örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmen. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

Schliessen Sie das Gerät nur über einen FI-Schalter (Fehlerstromschutz) an.

 Nur für USA oder Kanada: Schliessen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit „Hospital Grade“ an.

 Schliessen Sie bei Bedarf den Potenzialausgleichstecker an andere, im Einsatz befindliche, medizinische Geräte an.

INSTALACIÓN


Conexión a la alimentación eléctrica

INSTALLAZIONE

Connessione all'alimentazione di rete

INSTALLATION

Anslutning till strömkälla

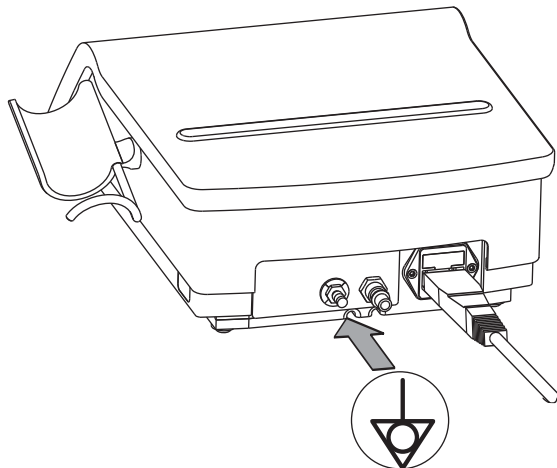

 Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red eléctrica con toma de tierra de protección.

 Compruebe que la tensión nominal coincide con la tensión de la red de su consulta, puesto que de lo contrario el aparato puede sufrir desperfectos.

Conecte el aparato a una toma de corriente protegida por un interruptor diferencial (protección FI).

 Solo para EE. UU. y Canadá: conecte solo a un receptáculo de grado hospitalario.

 Conecte la clavija equipotencial a otros dispositivos médicos cuando corresponda.

 Per evitare rischi di scossa elettrica questa apparecchiatura può essere collegata all'alimentazione di rete solo con messa a terra di protezione.

 Per prevenire danni all'unità, verificare che la tensione nominale corrisponda alla tensione della linea locale.

Usare l'unità solo in un'alimentazione di rete FI (FI = protezione da corrente residua)

 Solo per Stati Uniti o Canada: collegare solo ad una presa di grado ospedaliero.

 Se del caso, collegare il nodo equipotenziale agli altri dispositivi medici utilizzati.

 För att undvika elektrisk stöt får denna utrustning endast anslutas till en jordad nätkontakt.

 För att undvika skador på apparaten, kontrollera att dess märkspänning stämmer med den lokala spänningen.

Anslut apparaten endast till eluttag med jordfelsbrytare.

 Endast för USA eller Kanada: Anslut endast till sjukhusgraderat uttag.


 Anslut i förekommande fall den ekvipotentiella kontakten till annan medicinsk apparat som används.

Connecting to the compressed air supply

Connexion de l'appareil au réseau d'air comprimé

Anschluss der Druckluftversorgung

5 - 6 bar
(5000 - 6000 hPa)

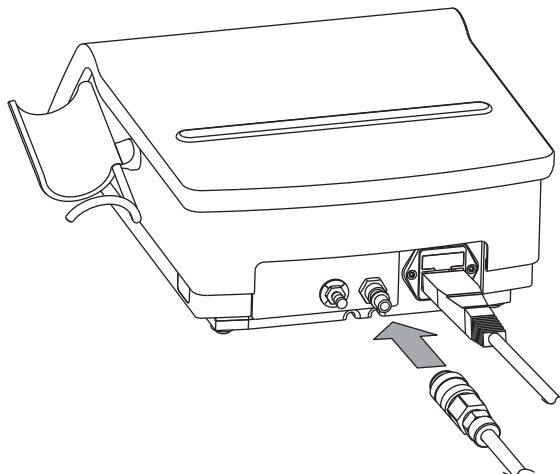

Use only medical-quality, dry compressed air, filtered at a minimum of 5µm, connected either to:

- the central compressed air supply system (wall socket)
- a separate compressor
- a cylinder (ISO 7396).

 Only use a compressed air supply conforming to local regulations and standards.

Il ne faut utiliser que de l'air comprimé sec, pur, et filtré par un filtre d'au moins 5µm. Cet air comprimé peut être délivré par:

- le réseau central de distribution d'air comprimé
- un compresseur séparé
- une bouteille d'air comprimé (ISO 7396).

 Utiliser uniquement une alimentation en air comprimé conforme aux prescriptions et règlements en vigueur.

Es darf nur klinisch reine, trockene Druckluft verwendet werden, die mindestens durch einen 5-µm-Filter geführt wurde. Die Luft muss entnommen werden aus:

- der zentralen Drucklufteinspeisung oder
- einem separaten Kompressor oder
- einer Druckluftflasche (ISO 7396).

 Benutzen Sie nur eine Druckluftversorgung, die die Vorschriften und Normen vor Ort erfüllt.

Conexión al suministro de aire comprimido

ConneSSIONE dell'alimentazione dell'aria compressa

Anslutning till tryckluftsförsörjningen

Use solo aire comprimido seco de calidad médica que haya sido filtrado a través de un filtro de un mínimo de 5 µm. El aire debe provenir de:

- el sistema central de suministro de aire comprimido (toma de pared)
- un compresor separado
- un cilindro de aire comprimido (ISO 7396).

 Utilice solo el suministro de aire comprimido conforme a las reglas y normas locales.

Utilizzare solo aria compressa secca, di grado medico, filtrata ad un minimo di 5µm, collegata sia:

- al sistema di alimentazione dell'aria compressa (presa a parete)
- a un compressore separato, o
- a una bombola (ISO 7396).

 Usare solo alimentazione di aria compressa ai sensi delle normative e standard locali.


Använd endast kliniskt ren, torr tryckluft, som minst filtreras genom ett 5µm-filter. Luften ska tas ifrån:

- central anläggning (vägganslutning)
- separat kompressor eller
- tryckluftscylinder (ISO 7396).

 Använd endast en lufttrycksförsörjning som uppfyller lokala bestämmelser och normer.

OPERATING THE UNIT

Connecting the handpiece

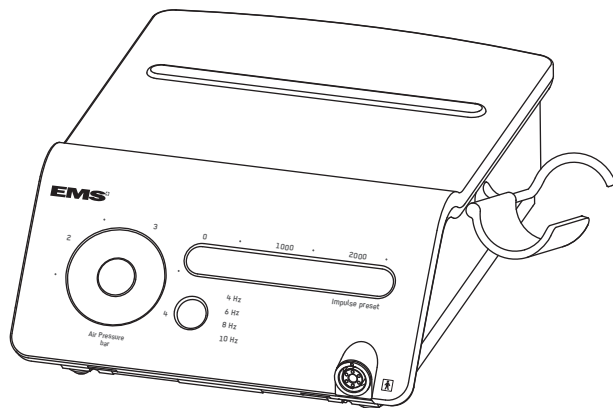

This unit can only be used with a Swiss DolorClast handpiece with trigger.

 For further details on preparing the Swiss DolorClast handpiece, please refer to the operating instructions of the handpiece.


 Before connecting the handpiece to the unit, check that the handpiece is correctly prepared.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Connexion de la pièce à main

BEDIENEN DES GERÄTS

Anschluss des Handstücks

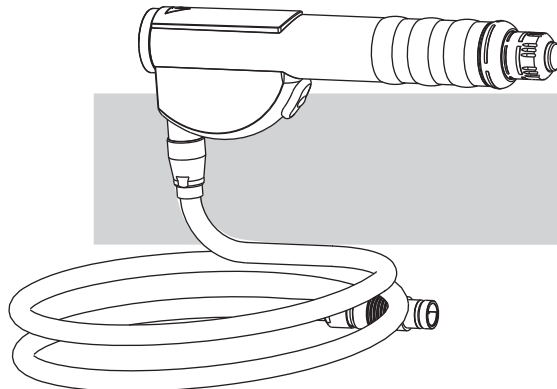

Cet appareil fonctionne uniquement avec une pièce à main Swiss DolorClast avec gâchette.

 Pour plus de détails concernant la préparation de la pièce à main Swiss DolorClast, veuillez vous référer au mode d'emploi de la pièce à main.

 Avant de brancher la pièce à main à l'appareil, vérifiez que la pièce à main soit correctement préparée.


Dieses Gerät kann nur mit einem Swiss DolorClast Handstück mit Auslöser eingesetzt werden.

 Weitere Informationen bezüglich der Vorbereitung des Swiss DolorClast-Handstücks entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Handstücks.

 Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Handstücks an das Gerät, dass das Handstück korrekt vorbereitet ist.


USO DEL APARATO

Conexión de la manguera para el mango

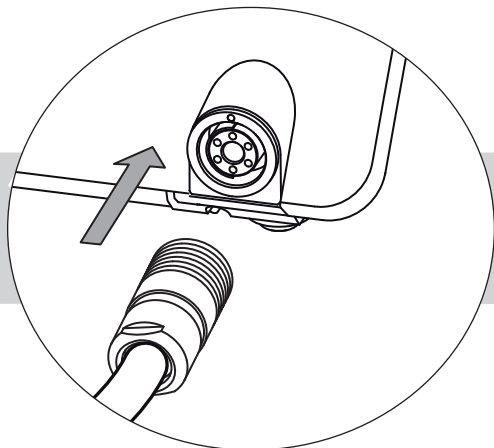

MESSA IN FUNZIONE DELL'UNITÀ

Collegamento del manipolo

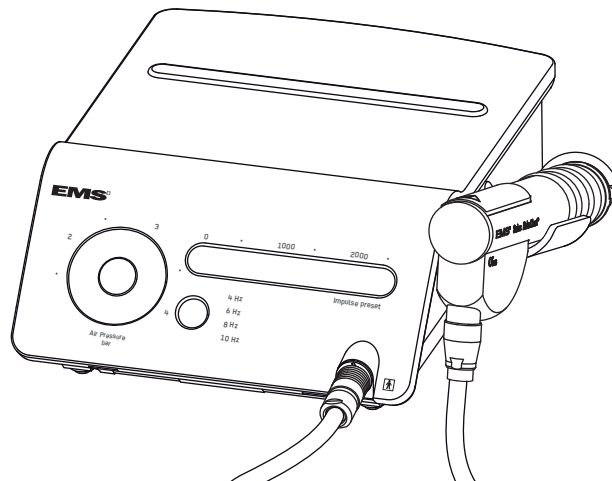

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Anslutning av handdelen

Este aparato solo puede utilizarse con un mango Swiss DolorClast con gatillo.

 Hallará información más detallada referente a la preparación del mango de Swiss DolorClast en las instrucciones de empleo del mango.

 Compruebe que el mango esté correctamente preparado antes de conectarlo al aparato.

L'unità può essere usata solo con un manipolo Swiss DolorClast con grilletto.

 Per ulteriori informazioni sulla preparazione del manipolo Swiss DolorClast, consultare le istruzioni per l'uso del manipolo.

 Prima di collegare il manipolo all'unità, controllare che il manipolo sia correttamente preparato.

Denna enhet kan endast användas med en Swiss DolorClast-handenhet med utlösare.


 Mer information om hur Swiss DolorClast-handdelen ska förberedas finns i användningsinstruktionerna till handdelen.

 Innan handdelen ansluts till apparaten, kontrollera att handdelen är förberedd på korrekt sätt.

Switching On

Mise sous tension

Einschalten

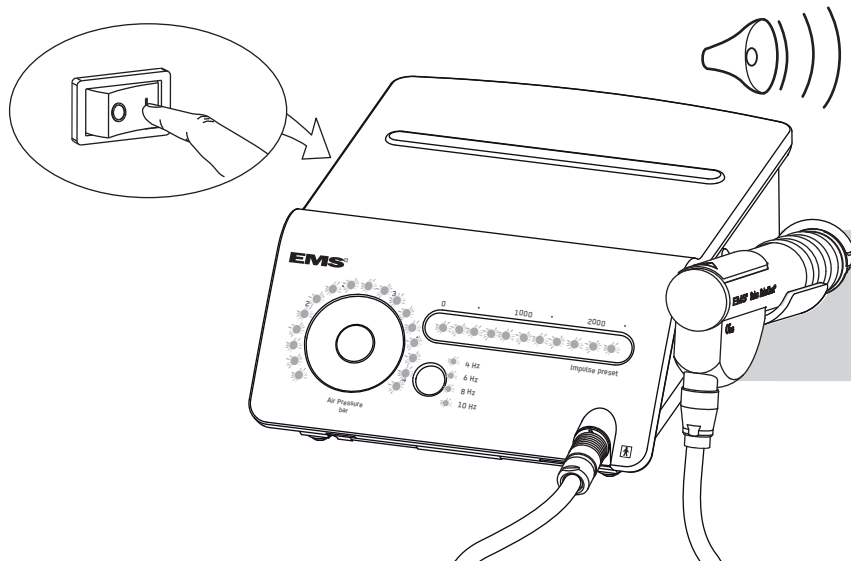

When the unit is switched on, the control lamps light up and then the unit returns to its default configuration.

✎ After 15 min. of inactivity, the unit goes into standby mode. Placing a finger on the touch-sensitive zone wakes the unit from standby mode. The unit returns to its previous configuration.

Lors de la mise sous tension de l'appareil, les voyants lumineux s'allument et ensuite l'appareil retourne dans la configuration par défaut.

✎ Après 15 min. d'inactivité, l'appareil se met en mode stand-by. Placer le doigt sur la zone sensible réveille l'appareil du mode stand-by. L'appareil retourne dans la configuration précédente.


Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten die LEDs der Bedienelemente auf und das Gerät geht in die Standardkonfiguration.

✎ Wenn 15 Minuten lang keine Aktivität am Gerät stattfindet, geht es in den Ruhezustand. Tippen Sie mit dem Finger auf den berührungsempfindlichen Bereich, um das Gerät wieder zu aktivieren. Das Gerät kehrt in die vorige Konfiguration zurück.

Encendido

Accensione

På/Av

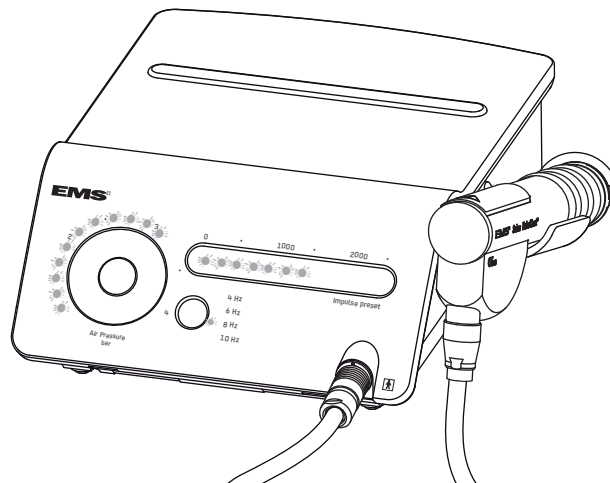

Cuando el aparato está encendido, las luces de control se iluminan y el aparato vuelve a su configuración por defecto.

 Después de 15 min de inactividad, el aparato vuelve al modo de espera. Al colocar un dedo en las zonas sensibles al tacto, el aparato se activa desde el modo de espera. El aparato vuelve a su configuración previa.

Quando l'unità viene accesa, le spie di controllo si accendono e l'unità ritorna alla configurazione predefinita.

 Dopo 15 min. di inattività, l'unità entra in modalità standby. Toccando la zona sensibile dello schermo, l'unità uscirà dalla modalità di standby. L'unità ritorna alla sua configurazione precedente.


När apparaten sätts på, tänds kontrollamporna och enheten återgår sedan till dess standardkonfigurering.

 Efter 15 min. inaktivitet går enheten till ett vänteläge. När ett finger placeras i den pekkänsliga zonen aktiveras enheten från vänteläget. Apparaten återgår till tidigare konfiguration.

Selecting the frequency

Sélection de la fréquence

Auswahl der Frequenz

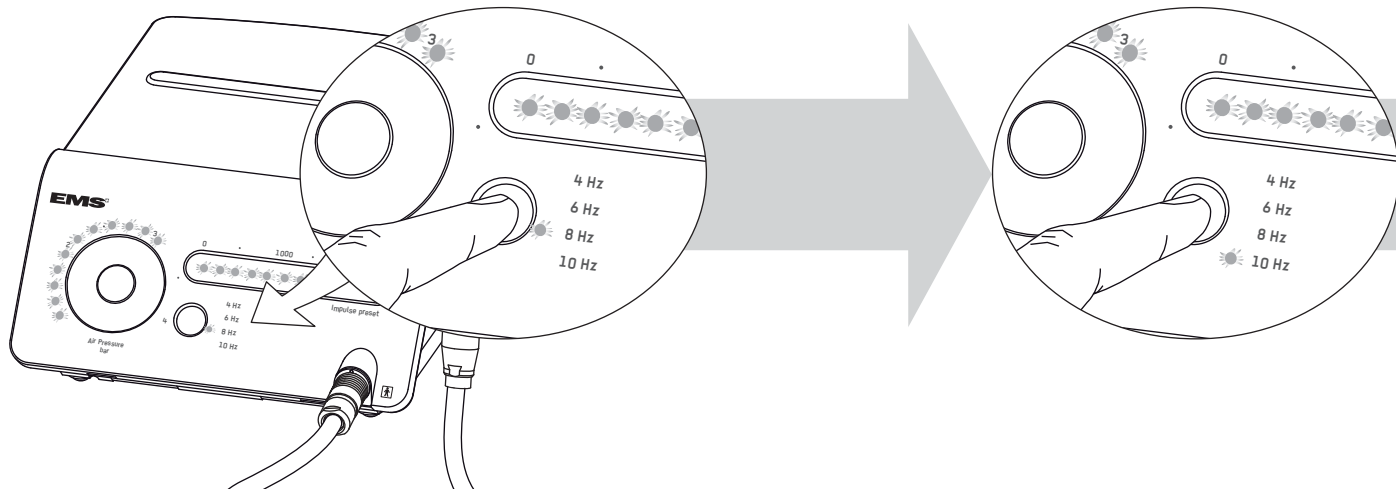

The unit can be operated at different frequencies.

👉 Press the frequency switch to change frequency. The LED for the selected frequency will light up.

👉 The frequency can be modified during the treatment.

L'appareil peut être utilisé à des fréquences différentes.

👉 Presser le bouton de sélection de fréquence pour changer la fréquence. La LED de la fréquence sélectionnée s'allume.

👉 La fréquence peut-être modifiée durant le traitement.

Das Gerät kann mit verschiedenen Frequenzen betrieben werden.


👉 Drücken Sie den Frequenztafter, um die Frequenz zu wechseln. Die LED der aktiven Frequenz leuchtet.

👉 Die Frequenz kann während der Behandlung geändert werden.

Selección de la frecuencia

Selezione della frequenza

Inställning av frekvensen

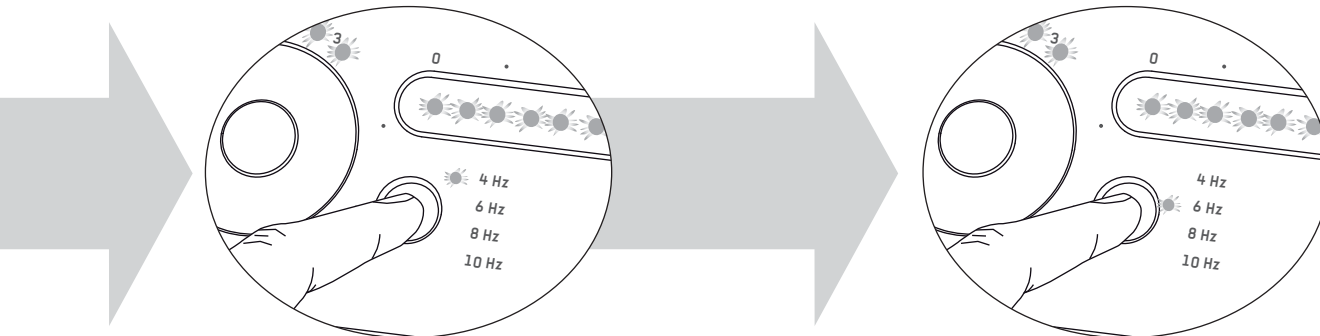

El aparato se puede utilizar con frecuencias diferentes.

☞ Pulse el interruptor de frecuencia para cambiar la frecuencia. Se iluminará el led correspondiente a la frecuencia seleccionada.

☞ La frecuencia se puede modificar durante el tratamiento.

L'unità può essere usata a diverse frequenze.

☞ Per cambiare la frequenza premere l'interruttore di frequenza. Si accenderà il LED relativo alla frequenza selezionata.

☞ La frequenza può essere modificata durante il trattamento.

Enheten kan användas vid olika frekvenser.


☞ Tryck på frekvensbrytaren för att ändra frekvens. Lysdioden för den valda frekvensen tänds.

☞ Frekvensen kan modifieras under behandlingen.

Setting the pressure

Réglage de la pression

Einstellung des Drucks

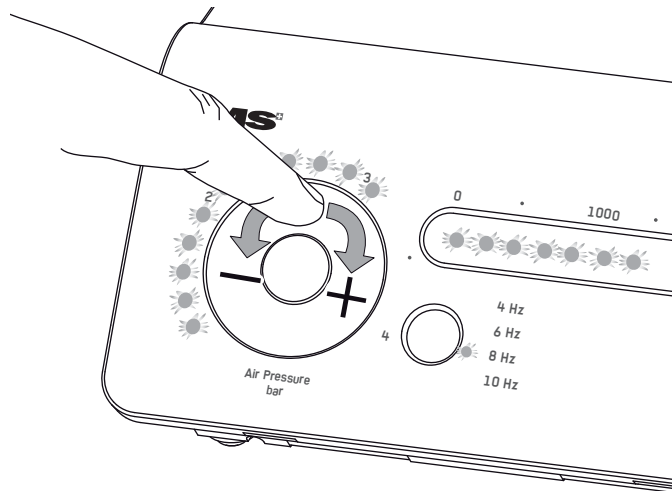

The settings can be obtained either by sliding or placing the finger on the touch-sensitive zone. A quick setting alternative is to place the finger directly at the desired setting level.

 The settings can be modified during the treatment.

 The air pressure is proportional to the energy flow density transferred to the treatment region.

Les réglages peuvent être obtenus soit en glissant, soit en plaçant le doigt sur la zone sensible. Placer le doigt directement à l'endroit désiré est une alternative rapide de réglage.

 Le réglage peut-être modifié durant le traitement.

 La pression de travail est proportionnelle à la densité de flux énergétique transmise à la zone de traitement.

Die Einstellungen können entweder durch Ziehen des Fingers oder durch Antippen des berührungsempfindlichen Bereichs vorgenommen werden. Am schnellsten geht es, wenn Sie mit dem Finger direkt auf die gewünschte Einstellung tippen.

 Die Einstellungen können während der Behandlung geändert werden.

 Der Luftdruck ist proportional zur Energieflussdichte, die im Therapiebereich abgegeben wird.

Ajuste de la presión

Impostazione della pressione

Inställning av trycket

Los ajustes se pueden hacer deslizando o colocando el dedo en la zona sensible al tacto. Una alternativa para un ajuste rápido es colocar el dedo directamente en el nivel de ajuste deseado.

 Los ajustes se pueden modificar durante el tratamiento.

 La presión del aire es proporcional a la densidad del flujo de energía transferida a la zona de tratamiento.

Le impostazioni si possono ottenere sia scorrendo che toccando con il dito sulla zona sensibile dello schermo. Una rapida alternativa di impostazione è porre il dito direttamente sul livello di impostazione desiderato.

 Le impostazioni possono essere modificate durante il trattamento.

 La pressione dell'aria è proporzionale alla densità di flusso dell'energia trasferita alla regione di trattamento.

För att ställa in trycket låter du fingret glida över den pekkänsliga zonen, eller placerar det på denna zon. Ett snabbt inställningsalternativ är att placera fingret direkt på den önskade inställningsnivån.


 Inställningarna kan modifieras under behandlingen.

 Lufttrycket är proportionellt mot energiflödesdensiteten som överförs till behandlingsområdet.

Presetting the number of pulses

Préréglage du nombre d'impulsions

Voreinstellung der Impulszahl

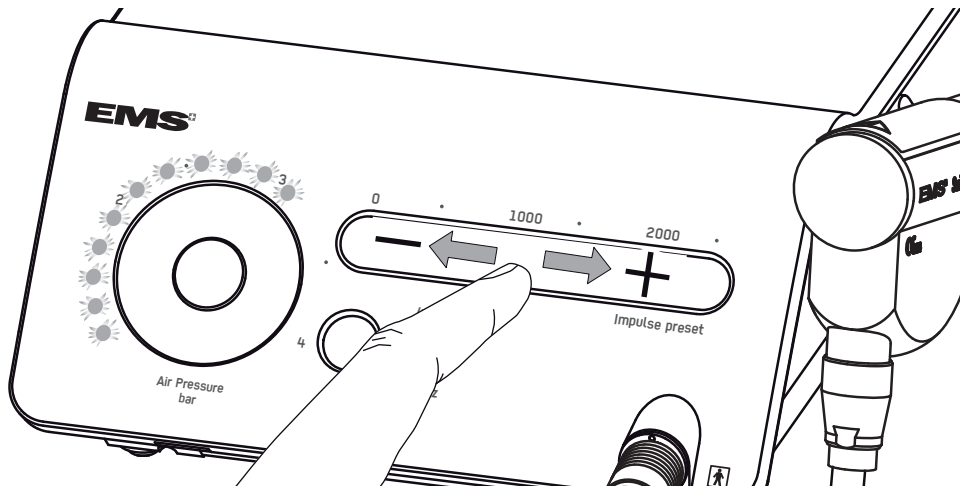

 The number of pulses can be set from 500 to 2500. Increase is by 500 pulses steps.

 The number of pulses cannot be modified during the treatment.

 Le nombre d'impulsions est réglable dans une plage comprise entre 500 et 2500, par incrément de 500 impulsions.

 Le nombre d'impulsions ne peut pas être modifié durant le traitement.

 Die Impulszahl kann in Schritten von 500 Impulsen zwischen 500 und 2500 eingestellt werden.

 Die Impulszahl kann während der Behandlung nicht geändert werden.

Preestablecimiento del número de impulsos

Preimpostazione del numero di impulsi

Förinställt pulsan tal

 El número de impulsos se puede configurar de 500 a 2500. Se incrementan en intervalos de 500 impulsos.

 El número de impulsos no se puede modificar durante el tratamiento.

 Il numero di impulsi può essere impostato da 500 a 2500. L'aumento avviene per incrementi da 500 impulsi.

 Il numero di impulsi non può essere modificato durante il trattamento.



 Pulsantalet kan ställas in från 500 till 2500. Ökning sker med 500 pulssteg.

 Pulsantalet kan inte modifieras under behandlingen.

Using the Swiss DolorClast smart

Utilisation du Swiss DolorClast smart

Einsatz des Swiss DolorClast smart

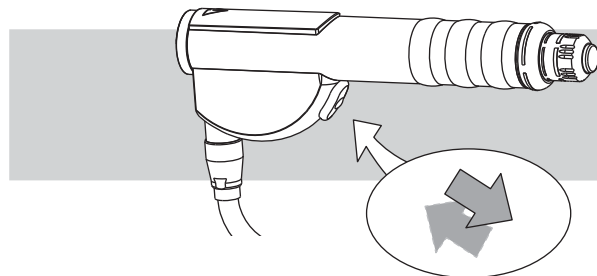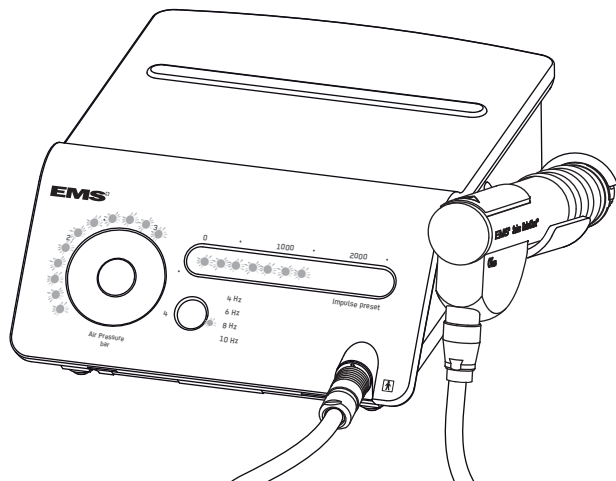

 Press the handpiece trigger to activate the pulses.

 During the treatment, the number of remaining pulses is indicated by the number of LEDs that remain lit (250 pulses per LED).

 Press handpiece trigger again to stop the pulses. The number of remaining pulses will be shown by the blinking LEDs.

 Appuyer sur la gâchette de la pièce à main pour activer les impulsions.

 Pendant le traitement, le nombre d'impulsions restantes est indiqué par le nombre de LEDs restant allumées (250 impulsions par LED).

 Appuyer à nouveau sur la gâchette de la pièce à main pour arrêter les impulsions. L'indication du nombre d'impulsions restante clignote.

 Drücken Sie den Auslöser am Handstück, um die Impulse zu aktivieren.


 Während der Therapie wird die Zahl der verbliebenen Impulse anhand der noch leuchtenden LEDs angezeigt (250 Impulse pro LED).

 Drücken Sie den Auslöser am Handstück nochmals, um die Impulse zu stoppen. Die Anzahl der verbliebenen Impulse wird durch die blinkenden LEDs angezeigt.

Uso del Swiss DolorClast smart

Impiego del Swiss DolorClast smart

Användning av Swiss DolorClast smart-enheten

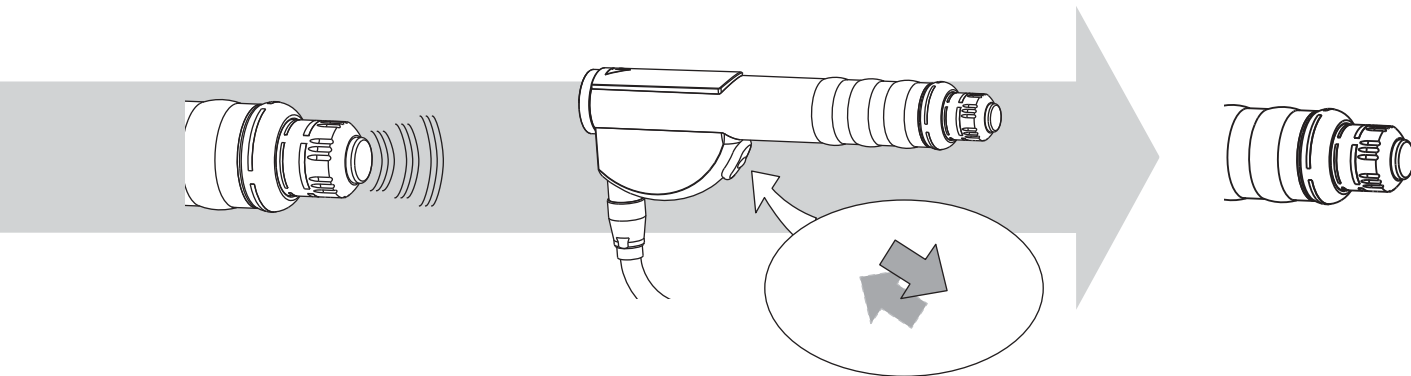

 Presione el gatillo del mango para activar los impulsos.

 Durante el tratamiento, el número de impulsos que quedan está indicado por el número de leds que siguen iluminados (250 impulsos por led).

 Presione el gatillo del mango de nuevo para detener los impulsos. Se mostrará el número de impulsos que quedan mediante los leds intermitentes.

 Per attivare gli impulsi premere il grilletto del manipolo.

 Durante il trattamento, il numero degli impulsi rimanenti viene indicato dal numero di LED rimasti accesi (250 impulsi per LED).

 Per interrompere gli impulsi premere nuovamente il grilletto del manipolo. Il numero degli impulsi rimanenti verrà visualizzato dai LED lampeggianti.

 Tryck på handenhetens utlösare för att aktivera pulserna.

 Under behandlingen, anges antalet kvarvarande pulser med antalet tända lysdioder (250 pulser per lysdiod).

 Tryck på handenhetens utlösare igen för att avbryta pulserna. Antalet kvarvarande pulser visas med de blinkande lysdioderna.

CLEANING AND DISINFECTING




NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Cleaning the unit

Nettoyage de l'appareil

Reinigung des Geräts

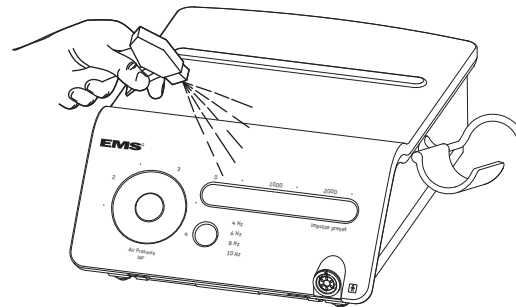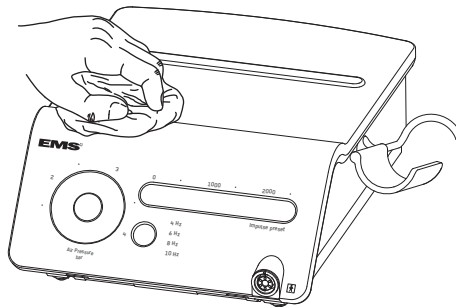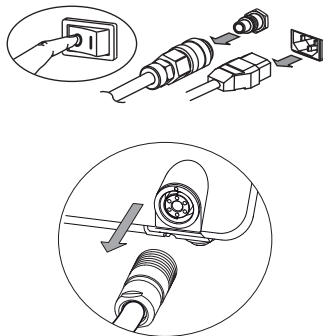

⚠ Clean the unit only with an alcohol-based, commercially available (ethanol, isopropanol), colorless disinfectant. The use of scouring powder or an abrasive sponge will damage its surface.

⚠ The unit is not protected against water spray. It cannot be sterilized.

⚠ Follow present-day regulations enforced in your country for reprocessing.

⚠ Nettoyer l'appareil uniquement avec un désinfectant sans colorant à base d'alcool, vendu dans le commerce (éthanol, isopropanol). L'utilisation de poudre à récurer ou d'une éponge abrasive endommagerait sa surface.

⚠ L'appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. Il ne peut pas être stérilisé.

⚠ Se conformer aux règlements en vigueur dans votre pays en ce qui concerne le retraitement.

⚠ Reinigen Sie das Gerät mit einem handelsüblichen, farblosen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Ethanol, Isopropanol). Bei der Verwendung eines Scheuerpulvers oder Hartschwamms kann die Oberfläche beschädigt werden.

⚠ Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt. Es kann nicht sterilisiert werden.


⚠ Die vor Ort geltenden, aktuellen Vorschriften zur Wiederverwendung von Geräten sind zu beachten.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PULIZIA E DISINFEZIONE


RENGÖRING OCH DESINFICERING

Limpieza del aparato

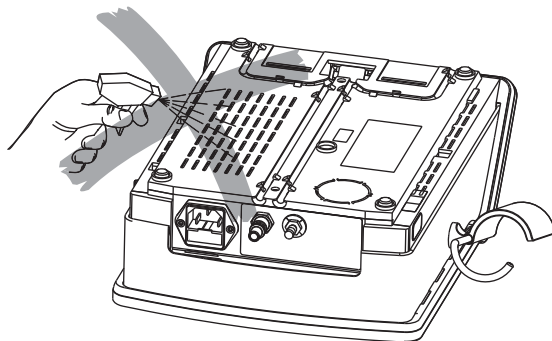

Pulizia dell'unità

Rengöring av enheten

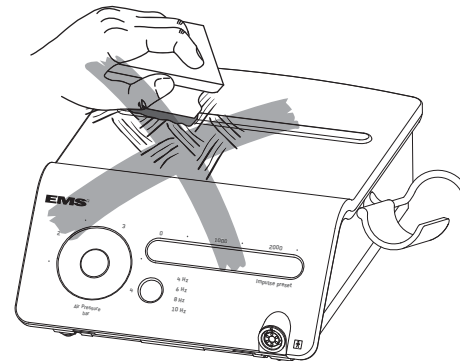

⚠ Limpie su aparato solo con un desinfectante sin colorantes a base de alcohol comercializado (etanol, isopropanol). La utilización de polvos de limpieza o de una esponja abrasiva dañaría su superficie.

⚠ El aparato no está protegido contra las proyecciones de agua. No puede esterilizarse.

⚠ Siga la normativa vigente en su país para el reprocesado.

⚠ Pulire l'unità solo con un disinfettante a base di alcool, incolore (etanol, isopropanolo), disponibile in commercio. L'utilizzo di polveri o spugne abrasive ne danneggerà le superfici.

⚠ L'unità non è protetta dagli spruzzi d'acqua. Non può essere sterilizzata.

⚠ Attenersi alle normative in vigore a livello locale e nazionale sul ricondizionamento.

⚠ Rengör apparaten endast med ett ofärgat, alkoholbaserat (etanol, isopropanol) desinfektionsmedel som finns tillgängligt i handeln. Användning av skurpulver eller hård tvättsvamp kan orsaka skador på ytan.


⚠ Apparaten är inte skyddad mot vattenstänk. Den kan inte steriliseras.

⚠ Följ aktuella bestämmelser som gäller i ditt land vid återbearbetning.

Cleaning the handpiece

Nettoyage de la pièce à main

Reinigung des Handstücks

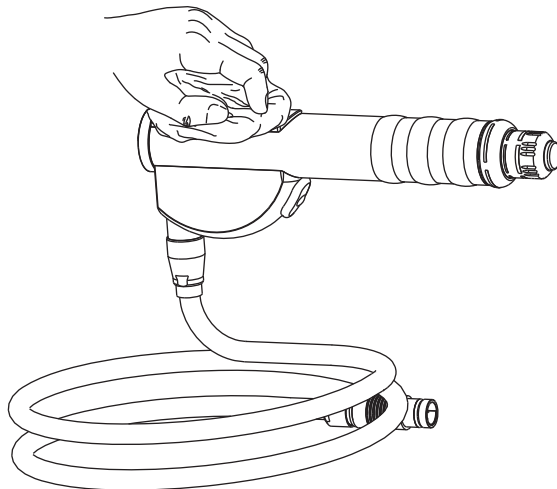


 For detailed information about the cleaning, disinfection and sterilizing procedure, please refer to the operating instructions of the handpiece.


 Pour connaître les procédures de nettoyage, désinfection et stérilisation, veuillez vous référer au mode d'emploi de la pièce à main.

 Informationen zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren des Handstückes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Handstücks.

Limpieza del mango

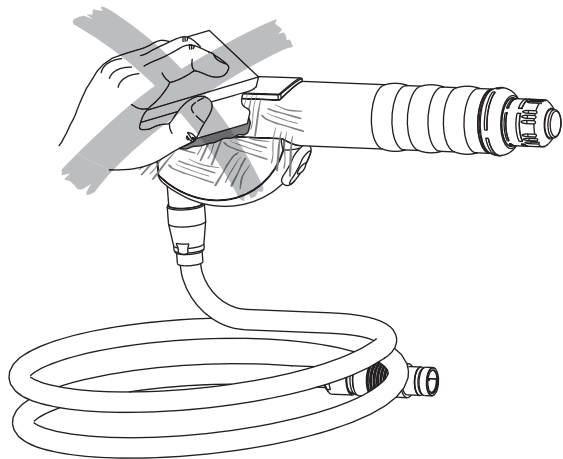

Pulizia del manipolo

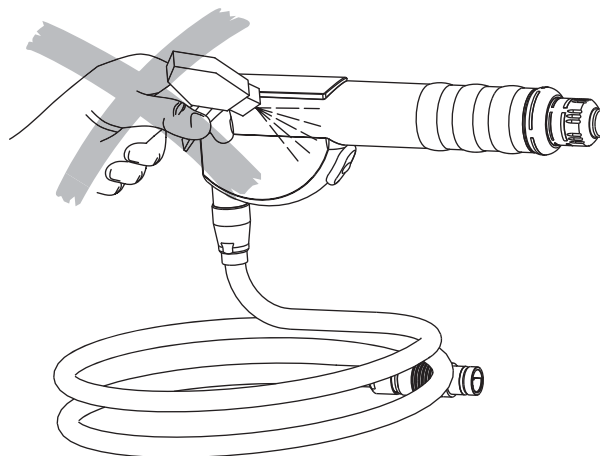

Rengöring av handdelen

 Para conocer los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización, consulte las instrucciones de empleo del mango.

 Per informazioni dettagliate sulla procedura di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, consultare le istruzioni per l'uso del manipolo.

 Mer information om rengöring, desinficering och sterilisering finns i användningsinstruktionerna till handdelen.

MAINTENANCE


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

WARTUNG

Fuses

Fusibles

Sicherungen

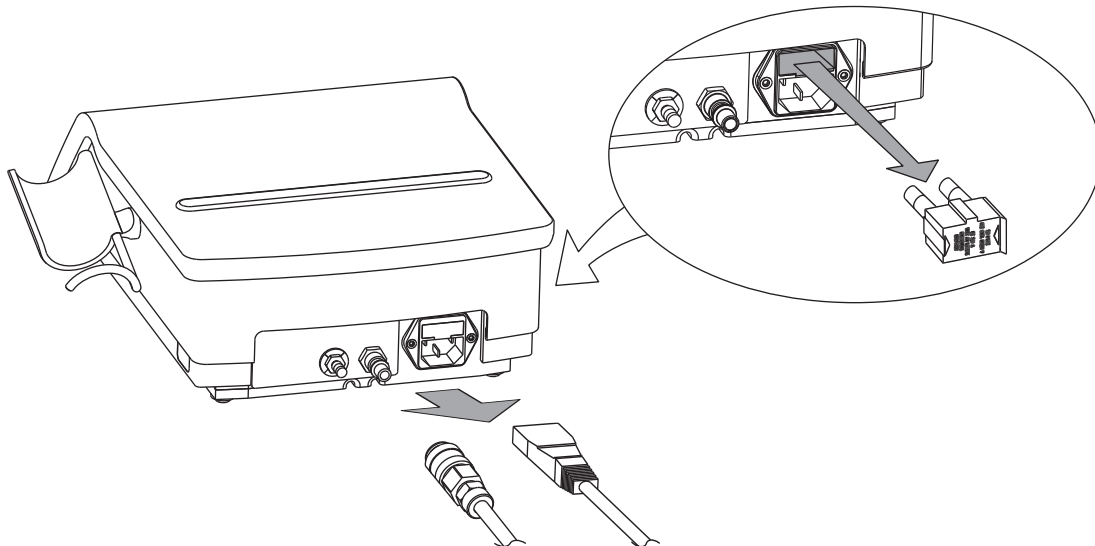

⚠ Only replace the fuse with the type indicated on the back of the unit.

👉 Should legal provisions in your country specify maintenance intervals, please comply with the relevant regulations.

⚠ Remplacer uniquement par le type de fusible mentionné au dos de l'appareil.

👉 Si les dispositions légales en vigueur dans votre pays prévoient des contrôles périodiques, il convient de s'y conformer.

⚠ Ersetzen Sie die Sicherung ausschliesslich durch den auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Sicherungstyp.

👉 Wenn die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land Wartungsintervalle vorschreiben, so gelten diese.

MANTENIMIENTO


Fusibles

MANUTENZIONE

Fusibili

UNDERHÅLL

Säkringar

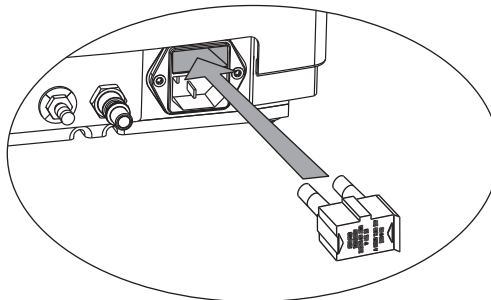

⚠ Reemplazar únicamente por el mismo tipo de fusible indicado en el panel posterior del aparato.

👉 Si las disposiciones legales en su país prescriben intervalos de mantenimiento, debe cumplir la normativa pertinente.

⚠ Sostituire solo con fusibili del tipo indicato sul retro dell'unità.

👉 Nel caso nel paese di residenza siano in vigore normative che prevedono intervalli di manutenzione attenersi alle rispettive normative.


⚠ Använd endast den typ av säkring som anges på apparatens baksida.

👉 Om lagbestämmelserna i ditt land kräver underhållsintervall måste dessa följas.

Error mode

Mode Erreur

Fehlermodus

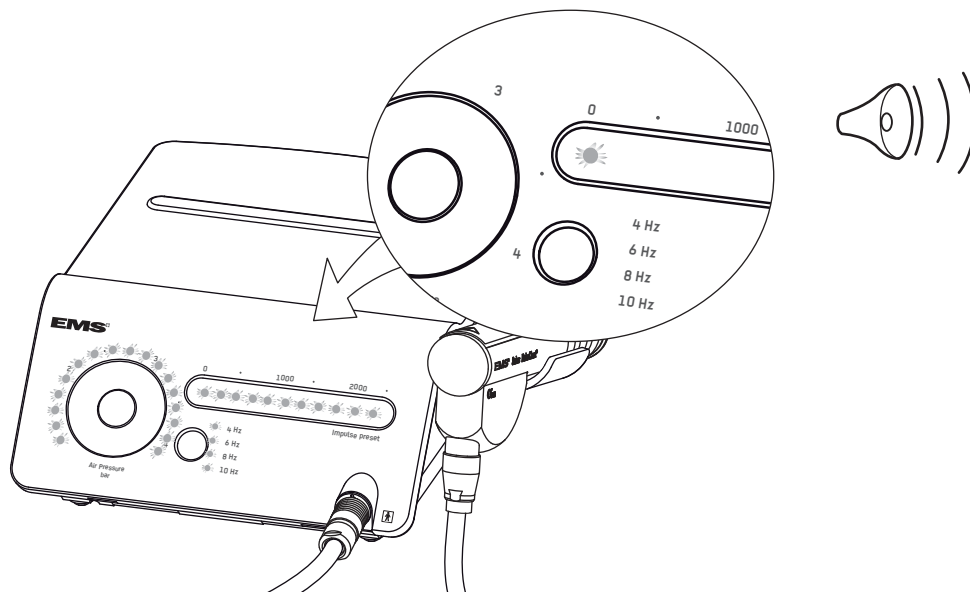

In Error mode, all LEDs will blink and it is not possible to operate the unit.

Error code displayed alternatively on the impulse preset:

- 1 LED = Handpiece error
- 2 LEDs = Air pressure error
- 3 LEDs = Software error



To exit from the error mode, switch off the unit.

En mode Erreur, toutes les LEDs clignotent et l'appareil ne peut plus être utilisé.

Code d'Erreur affiché en alternance sur le réglage d'impulsions:

- 1 LED = Erreur pièce à main
- 2 LEDs = Erreur pression d'air
- 3 LEDs = Erreur logiciel



Pour sortir du mode Erreur, éteindre l'appareil.

Im Fehlermodus blinken alle LEDs und das Gerät ist nicht betriebsbereit.


Der Fehlercode wird mit den Impuls-LEDs angezeigt:

- 1 LED = Fehler am Handstück
- 2 LEDs = Fehler bei der Druckluft
- 3 LEDs = Softwarefehler




Um den Fehlermodus zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus.

Modo de error

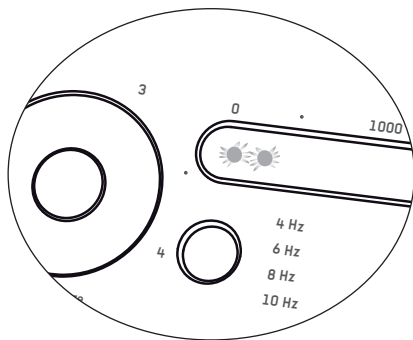

Modalità errore

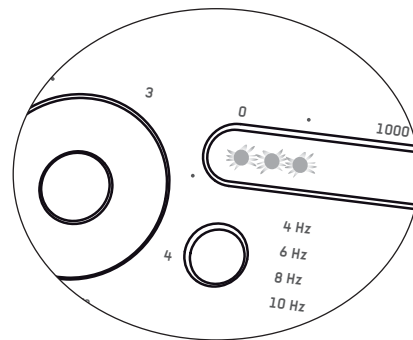

Felläge



En modo de error, todos los leds parpadearán y el aparato no funcionará.

Código de error mostrado alternativamente en la configuración de impulsos:

- 1 led = Error del mango
- 2 leds = Error de la presión del aire
- 3 leds = Error del software

 Para salir del modo de error, apague el aparato.

In Modalità errore, tutti i LED lampeggiano e non è possibile mettere in funzione l'unità.

Codice di errore visualizzato alternativamente sul valore preimpostato degli impulsi:

- 1 LED = errore manipo
- 2 LED = errore di pressione dell'aria
- 3 LED = errore software

 Per uscire dalla modalità errore, spegnere l'unità.

I felläge blinkar alla lysdioder att blinka och det går inte att använda enheten.

Felkod visas alternativt på den förinställda pulsen:


- 1 lysdiod = fel på handdel
- 2 lysdioder = fel på lufttryck
- 3 lysdioder = programfel

 För att gå ur felläget, stäng av enheten.

Display of software version

Affichage de la version du logiciel

Anzeige der Softwareversion

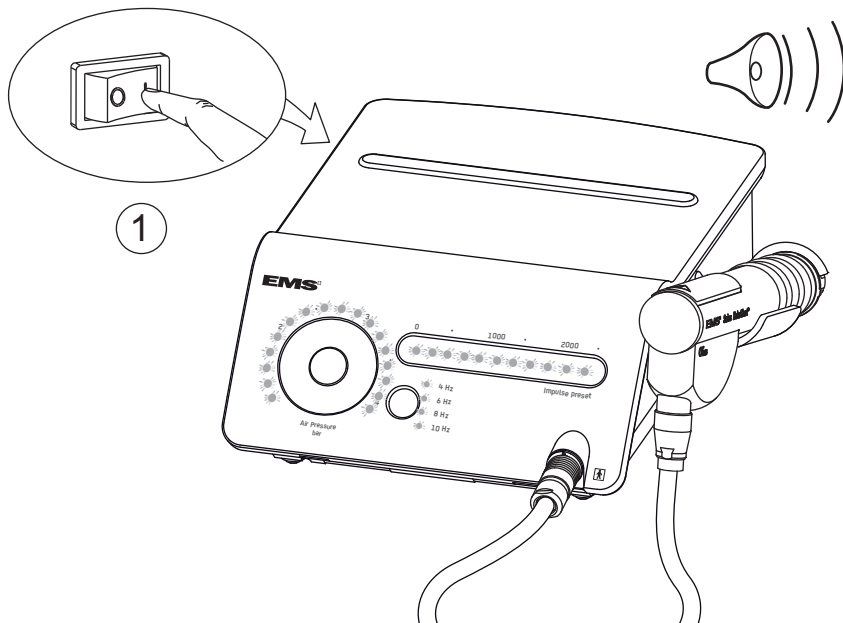

To display the software version loaded in the unit, switch on the unit and press two setting controls simultaneously.

 The LEDs corresponding to the pulse setting will blink: 1 LED means software version A, 2 LEDs means software version B and so on.


Pour afficher la version du logiciel de l'appareil, mettre sous tension l'appareil, puis presser 2 boutons de réglage simultanément.

 Les LEDs correspondantes au réglage des impulsions clignoteront: 1 LED signifie la version A du logiciel, 2 LEDs signifie la version B et ainsi de suite.


Um die Softwareversion des Geräts anzuzeigen, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie gleichzeitig zwei Bedienelemente.

 Die Impuls-LEDs blinken: 1 LED bedeutet Softwareversion A, 2 LEDs bedeuten Softwareversion B und so weiter.

Visualización de la versión del software

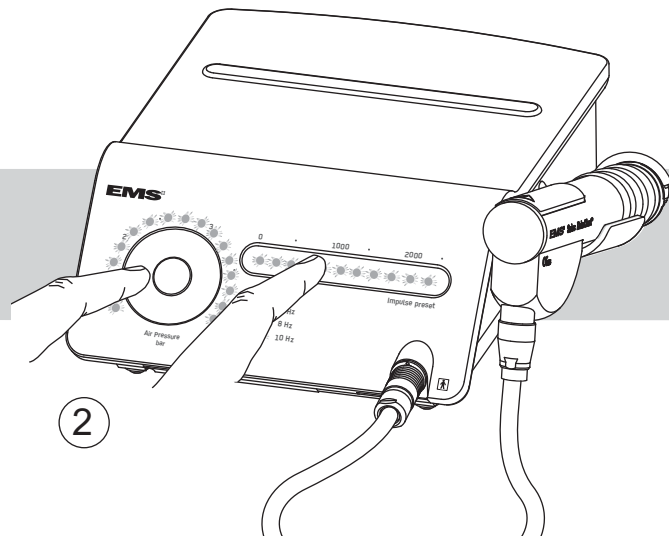

Visualizzazione della versione software

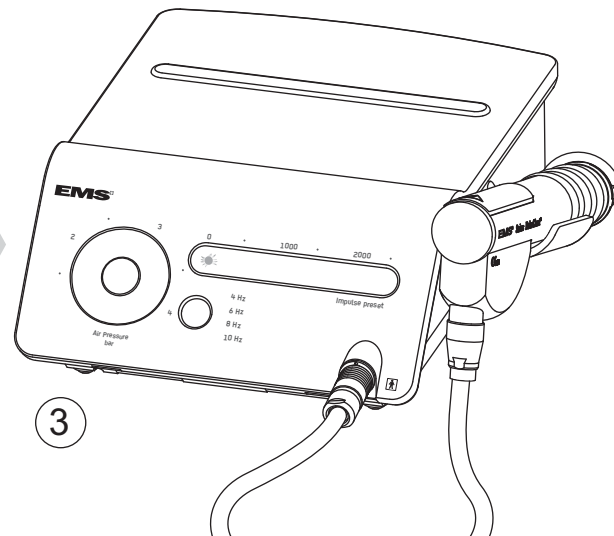

Para ver la versión del software instalada en el aparato, enciéndalo y presione dos controles de ajuste de forma simultánea.

Los leds correspondientes al ajuste de impulsos parpadearán: 1 led indica versión A del software; 2 leds indican versión B del software, y así sucesivamente.

Per visualizzare la versione software caricata sull'unità, accendere l'unità e premere contemporaneamente due comandi di impostazione.

I LED corrispondenti all'impostazione degli impulsi lampeggeranno: 1 LED significa versione del software A, 2 LED significa versione del software B e così via.

Visning av programversion

För att visa programversionen i enheten, sätt på apparaten och tryck samtidigt på två inställningskontroller.

Lysdioderna som motsvarar pulsinställningen blinkar: 1 lysdiod betyder programversion A, 2 lysdioder betyder programversion B osv.

SAFETY PRECAUTIONS

EMS and the distributor of this product accept no liability for direct or consequential injury or damage resulting from improper use, arising in particular through non-observance of the operating instructions, or improper preparation and maintenance.

 For further details on treatments, please refer to the operating instructions "Medical applications" for this product.

 Use for the intended purpose only. Before using the product, make sure that the operating instructions have been studied. This also applies to any equipment used with this product. Failure to strictly follow the operating instructions may result in serious injury to the patient or user or the product being damaged, possibly beyond repair.

 Extended use should be avoided in order to prevent the harmful effect of vibrations on the handpiece.

 Risk of explosion: do not use this product in the presence of inflammable anaesthetics or gases.

 This device must only be used by or on the order of a physician.

 In cases of tinnitus, it is recommended that the patient (treatment on the upper body) and the user (extended use) wear ear protection.

 Always examine the product for damage before commencing treatment. Damaged accessories or a damaged unit must not be used and must be replaced. Use original EMS spare parts and accessories only.

 Repairs should only be carried out by an approved EMS repair center.

 This product has been investigated with regard to safety from electrical shock and fire hazard. CSA (Canadian Standard Association) has not investigated other physiological effects.

REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

EMS et le distributeur de ce produit ne peuvent être tenus responsables d'éventuels préjudices directs et indirects résultant d'un emploi inadéquat ou d'un maniement incorrect, en particulier lorsque le mode d'emploi n'a pas été respecté ou lorsque la préparation et l'entretien n'ont pas été correctement effectués.

 Pour plus de détails concernant les traitements, veuillez vous référer au mode d'emploi "Applications médicales" pour ce produit.

 N'utilisez le produit que pour les applications prévues. Ce mode d'emploi doit être soigneusement étudié avant l'utilisation. Ceci est également valable pour tous les équipements pouvant être utilisés en combinaison avec ce produit. Vous éviterez ainsi tous risques de blessures et d'endommagement de votre produit.

 Une utilisation prolongée de l'équipement doit être évitée en raison des vibrations mécaniques émises par la pièce à main en fonctionnement.

 Risque d'explosion: n'utilisez pas ce produit en présence d'anesthésiques ou de gaz inflammables.

 Ce produit doit être utilisé uniquement par un médecin ou sur prescription d'un médecin.

 En cas d'acouphène, il est recommandé pour le patient (traitement sur le haut du corps) et pour l'utilisateur (utilisation prolongée) d'utiliser des protections pour les oreilles.

 Vérifier avant chaque traitement que le produit ne présente pas de défauts. Un accessoire ou un appareil endommagé ne doit plus être utilisé. Il doit être remplacé. N'utilisez que des pièces et des accessoires EMS d'origine.

 Faites réparer ce produit exclusivement par EMS ou par un intervenant agréé par EMS.

 Ce produit a fait l'objet d'une étude en ce qui a trait aux risques de choc électrique et d'incendie. CSA (Canadian Standard Association) n'a pas étudié les effets physiologiques.

SICHERHEITSHINWEISE

EMS und der Vertreter des Produkts haften nicht für direkte und Folgeschäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts auftreten, insbesondere durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgemäße Vorbereitung oder Wartung.

 Weitere Informationen bezüglich Therapiedetails entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung „Medizinische Anwendungen“ für dieses Produkt.

 Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck einsetzen. Vor Einsatz des Geräts müssen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben. Dies gilt gleichermaßen für alle in Kombination mit diesem Gerät eingesetzten Produkte. Auf diese Weise vermeiden Sie Verletzungen sowie Beschädigungen an Ihrem Produkt.

 Ein lang andauernder Einsatz des Geräts sollte vermieden werden, um schädlichen Auswirkungen durch Vibrationen des Handstücks vorzubeugen.

 Explosionsgefahr: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gegenwart von entzündlichen Anästhetika oder Gasen.

 Dieses Produkt darf nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes benutzt werden.

 Wenn ein Tinnitus vorliegt, ist es empfehlenswert, dass der Patient (bei Behandlung am Oberkörper) und der Bediener (wegen häufigerem Einsatz) einen Ohrschutz tragen.

 Überprüfen Sie Ihr Produkt vor jeder Behandlung auf Schäden. Beschädigtes Zubehör oder ein beschädigtes Gerät dürfen nicht mehr verwendet werden und sind zu ersetzen. Verwenden Sie ausschliesslich Original-EMS-Ersatzteile und -Zubehör.

 Reparaturen dürfen nur von einem von EMS autorisierten Reparaturzentrum ausgeführt werden.

 Dieses Produkt war Gegenstand einer Studie bezüglich Brand- und Stromschlaggefahr. Die CSA (Canadian Standard Association) hat die physiologischen Wirkungen nicht untersucht.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

EMS y los distribuidores de este producto no se hacen responsables de los daños directos e indirectos derivados del uso o manipulación incorrectos de este producto, especialmente por la no observación de las instrucciones de empleo o por una preparación y un mantenimiento incorrectos.



Hallará información más detallada referente a los tratamientos en las instrucciones de empleo "Aplicaciones médicas" de este producto.



Utilizar únicamente para su finalidad prevista. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea con atención estas instrucciones de empleo hasta su completa comprensión. Válido igualmente para todos los productos que utilice en combinación con este aparato. La no observancia de estas instrucciones de empleo puede tener como consecuencia lesiones o desperfectos de los productos, puede que irreparables.



Se debe evitar el uso prolongado para prevenir el efecto perjudicial de las vibraciones sobre el mango.



Riesgo de explosión: no utilice este producto en presencia de anestésicos o gases inflamables.



Este dispositivo solo debe ser utilizado por un médico, o por prescripción médica.



En caso de que se produzcan zumbidos en los oídos, es recomendable que el paciente (tratamiento en la parte superior del cuerpo) y el usuario (uso prolongado) utilicen protección auditiva.



Compruebe antes de cada tratamiento que su producto no presenta defectos. Un accesorio o un aparato dañado no se debe utilizar y debe ser sustituido. Utilice únicamente piezas y accesorios originales EMS.



La reparación de este producto debe ser llevada a cabo exclusivamente por un centro de reparación autorizado EMS.



Este producto ha sido sometido a un estudio sobre los riesgos de descarga eléctrica y de incendio. La CSA (Canadian Standard Association) no ha estudiado otros efectos fisiológicos.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

EMS e il distributore di questo prodotto non si assumono alcuna responsabilità per danni o lesioni diretti o conseguenti derivati da un uso improprio, specificamente dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o da una preparazione e manutenzione non corrette.



Per ulteriori informazioni sui trattamenti, consultare le istruzioni per l'uso "Applicazioni mediche" per questo prodotto.



Utilizzare esclusivamente per l'uso previsto. Prima di utilizzare il prodotto, studiare le istruzioni per l'uso. Ciò vale anche per qualsiasi apparecchiatura utilizzata con questo prodotto. La mancata adesione alle istruzioni per l'uso può comportare gravi lesioni al paziente o all'operatore o danni al prodotto, possibilmente irreparabili.



Per prevenire il dannoso effetto delle vibrazioni sul manipoles evitare un uso prolungato.



Rischio di esplosione: non usare questo prodotto in presenza di gas anestetici o infiammabili.



Questo dispositivo può essere usato da un medico o su sua prescrizione.



In caso di acufene, si consiglia che il paziente (trattamento nella parte superiore del corpo) e l'operatore (uso prolungato) indossino una protezione auricolare.



Prima di iniziare il trattamento esaminare sempre il prodotto per la presenza di eventuali danni. Gli accessori danneggiati o un'unità danneggiata non devono essere utilizzati e vanno sostituiti. Usare esclusivamente parti di ricambio e accessori EMS originali.



Le riparazioni vanno effettuate solo presso un centro assistenza EMS autorizzato.



Questo prodotto è stato sottoposto ad uno studio di valutazione dei rischi di scossa elettrica e pericolo di incendio. La CSA (Canadian Standard Association) non ha studiato altri effetti fisiologici.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

EMS eller återförsäljaren av denna produkt tar inte på sig ansvaret för direkt eller indirekt skada som är ett resultat av felhantering, av att bruksanvisningen inte följts eller av att enheten inte har förberetts eller underhållits på korrekt sätt.



Mer information om behandling finns i bruksanvisningen "Medicinska tillämpningar".



Används endast till avsett ändamål. Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Detta gäller även andra produkter som används tillsammans med denna apparat. Om bruksanvisningen inte följs strikt kan detta leda till allvarig skada på patienten eller användaren, eller ge skador på produkten, som i värsta fall blir oreparerbar.



Långvarig användning bör undvikas för att förebygga skador av handdelens vibrationer.



Risk i närvaro: använd inte denna produkt vid närvaro av brandfarliga anestetika eller gaser.



Denna enhet får endast användas av eller på ordination av en läkare.



I händelse av tinnitus, rekommenderas det att patienten (vid behandling på överkroppen) och användaren (långvarig användning) bär öronskydd.



Kontrollera alltid om apparaten är skadad innan behandling påbörjas. Skadade tillbehör eller en skadad enhet får inte användas och måste bytas ut. Använd endast reservdelar och tillbehör från EMS.



Reparationer får endast utföras av ett EMS- auktoriserat serviceställe.




Produkten har undersökts med avseende på säkerhet mot elstöt och brand. CSA (Canadian Standard Association) har inte undersökt andra fysiologiska effekter.

STORING THE PRODUCT

RANGEMENT DU PRODUIT

AUFBEWAHRUNG DES PRODUKTS

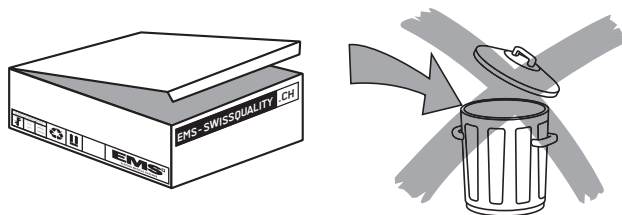

 Keep the original packaging until the product is to be disposed of permanently. You can use it for shipping and storage.

Should you wish to store your product for an extended period:

- Proceed as described in the chapter "Cleaning and disinfecting".
- Place the product and all accessories in the original packaging.

Please refer to the storage and transport conditions in the "Technical data" section.

 Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine jusqu'à la mise au rebut de votre produit. Vous pouvez ainsi l'utiliser à tout moment pour le transport et le stockage.

Si vous envisagez de ne pas utiliser votre produit durant une période prolongée:

- Suivez les étapes décrites au chapitre "Nettoyage et désinfection".
- Rangez le produit et les accessoires dans l'emballage d'origine.

Veuillez tenir compte des conditions de stockage et de transport décrites au chapitre "Caractéristiques techniques".

 Bewahren Sie die Originalverpackung bis zur endgültigen Entsorgung Ihres Produkts auf, damit Sie diese jederzeit für die Lagerung oder den Transport benutzen können.

Wenn Sie Ihr Produkt längere Zeit nicht benutzen wollen:

- Gehen Sie entsprechend dem Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ vor.
- Verpacken Sie dann das Produkt und alle Zubehörteile in der Originalverpackung.

Beachten Sie bitte auch die Lager- und Transportbedingungen im Abschnitt "Technische Daten".

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

 Le aconsejamos que conserve el embalaje original hasta el momento de deshacerse de su producto. De este modo podrá utilizarlo en cualquier momento para almacenarlo temporalmente o transportarlo.

Si piensa almacenar el producto durante un período prolongado:

- Siga el procedimiento descrito en el capítulo "Limpieza y desinfección".
- Embale el producto y todos sus accesorios en el embalaje original.

Por favor, observe también las condiciones de almacenamiento y transporte descritas en el capítulo "Especificaciones técnicas".

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

 Conservare l'imballo originale fino allo smaltimento definitivo del prodotto, in quanto potrà essere utilizzato per la spedizione o la conservazione.

Per conservare il prodotto per un periodo di tempo prolungato:

- Procedere come descritto nel capitolo "Pulizia e disinfezione".
- Collocare il prodotto e tutti gli accessori nell'imballo originale.

Consultare le condizioni di conservazione e di trasporto nel capitolo "Dati tecnici".

FÖRVARING AV APPARATEN

 Behåll originalförpackningen tills produkten ska kasseras för gott. Förpackningen kan alltid användas till transport eller förvaring.

Gör så här om produkten ska ställas av under längre tid:

- Följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring av enheten".
- Lägg produkten och alla tillbehör i originalförpackningen.

Förvarings-och transportförhållanden beskrivs i avsnittet "Tekniska data".

PRODUCT DISPOSAL

The product must not be disposed of as domestic waste.

Should you wish to definitively dispose of the product, please comply with the regulations that apply in your country.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) belonging to customers located in the European Union may be shipped to EMS for recycling in accordance to the WEEE regulations. The costs of recycling, exclusive of shipping fees, are covered by EMS.

WARRANTY

Damages due to non-adherence to the operating instructions or wear of parts are excluded from warranty.



The warranty of your product will be void if you try to open it.

ACCESSORIES

Accessories are available from EMS or an authorized dealer. Please contact your EMS customer service representative directly.

RECYCLAGE

Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle domestique.

Si vous souhaitez mettre définitivement au rebut le produit, respectez les directives nationales spécifiques en vigueur dans votre pays.

Les équipements électriques et électroniques en fin de vie appartenant aux clients localisés dans l'Union Européenne peuvent être envoyés à EMS pour être recyclés en accord avec la directive WEEE. Les coûts du recyclage, à l'exclusion des frais de transports, sont couverts par EMS.

GARANTIE

Des dégâts liés au non-respect du mode d'emploi ou l'usure des pièces sont exclus de la garantie.



La garantie de votre produit sera annulée si vous essayez de l'ouvrir.

ACCESSOIRES

Vous trouverez les accessoires auprès d'EMS ou d'un distributeur autorisé. Veuillez contacter votre service clientèle directement.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Wollen Sie Ihr Produkt endgültig entsorgen, beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten im Besitz von Kunden in der Europäischen Union kann gemäss der WEEE-Richtlinie für die Wiederverwertung an EMS zurückgegeben werden. Die Kosten für das Recycling, exklusive der Kosten für die Anlieferung, werden von EMS übernommen.

GARANTIE

Durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und durch Abnutzung entstandene Schäden an Gerätebestandteilen sind von der Garantie ausgeschlossen.



Die Garantie Ihres Produkts erlischt, wenn Sie versuchen, es zu öffnen.

ZUBEHÖR

Zubehör erhalten Sie bei Ihrer EMS-Niederlassung oder Ihrem EMS-Fachhändler. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren EMS-Kundendienst.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El producto no debe desecharse como residuo doméstico.

Si desea desechar el producto definitivamente, por favor respete las normas específicas vigentes en su país.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pertenecientes a clientes ubicados en la Unión Europea pueden enviarse a EMS para su reciclaje, según la directiva RAEE. Los costes del reciclaje, a excepción de los gastos de envío, están cubiertos por EMS.

GARANTÍA

Los daños que pudieran resultar de la no observación de las instrucciones de empleo y del desgaste de las piezas no están cubiertos por la garantía.



La garantía de su producto se invalidará si intenta abrirlo.

ACCESORIOS

Los accesorios se encuentran disponibles directamente en EMS o a través de cualquier distribuidor autorizado. Por favor, póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de EMS.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico.

Per smaltire definitivamente questo prodotto, attenersi alle normative in vigore nel proprio Paese.

Le apparecchiature elettroniche ed elettriche fuori uso (RAEE) appartenenti a clienti residenti nella UE potranno essere spedite a EMS per il riciclaggio in conformità alle normative RAEE. Il costo del riciclaggio, eccetto i costi di spedizione, sarà a carico di EMS.

GARANZIA

I danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o ad usura delle parti sono esclusi dalla garanzia.



La garanzia del prodotto sarà annullata in caso di tentativo di apertura del prodotto stesso.

ACCESSORI

Gli accessori sono disponibili presso EMS o i rivenditori autorizzati. Rivolgersi direttamente al servizio di assistenza clienti EMS.

PRODUKTBORTSKAFFNING

Produkten får inte kasseras som hushållsavfall.

Följ gällande regler i ditt land om du vill kassera produkten för gott.

Elektrisk och elektronisk utrustning som tillhör kunder i Europeiska unionen kan skickas till EMS för återvinning i enlighet med WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-bestämmelser. Kostnader för återvinning, exklusive leveranskostnader, täcks av EMS.

GARANTI

Garantin omfattar inte normal förslitning eller skador som har uppkommit på grund av att bruksanvisningen inte har följts.



Garantin upphör att gälla om du försöker att öppna produkten.

TILLBEHÖR

Tillbehör kan erhållas från EMS eller auktoriserad återförsäljare. Kontakta en representant från EMS kundservice direkt.

EMS-SERVICE

Should your product need additional servicing or repairs, please send it to your dealer or directly to your approved EMS repair center.

In case of non-authorized repairs or damages due to non-adherence to the operating instructions, EMS accepts no liability whatsoever. This will also void the warranty.



No modification of this equipment is allowed.



Please clean, disinfect and sterilize the product and all accessories as described in the operating instructions before dispatching them.

It is best to ship your product in the original packaging. It protects your product against damage during shipment.

When sending the product directly to the approved EMS repair center, please include the name of your dealer. This simplifies processing.

SERVICE EMS

Pour toute autre intervention de maintenance ou de réparation, envoyez votre produit à votre distributeur ou directement à votre centre de réparation agréé EMS.

Des réparations sans autorisation ou le non-respect du mode d'emploi dégagent EMS de toute responsabilité et annulent la garantie.



Aucune modification de cet équipement n'est permis.



Nettoyer, désinfecter et stériliser le produit et l'ensemble de ses accessoires conformément au mode d'emploi avant de les expédier.

Utiliser de préférence l'emballage d'origine pour l'expédition. Le produit sera mieux protégé contre les incidents de transport.

En cas d'expédition directe du produit vers un centre de réparation agréé EMS, indiquer le nom de votre distributeur. Cela permet de simplifier le traitement.

EMS-SERVICE

Für alle anderen Wartungs- oder Reparaturarbeiten schicken Sie Ihr Produkt bitte an Ihren Händler oder direkt an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.

Reparaturen ohne Erlaubnis sowie Schäden bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entbinden EMS von jeglicher Haftung. Ausserdem erlischt der Garantieanspruch.



An diesem Gerät dürfen keinerlei Modifikationen vorgenommen werden.



Bitte reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie das Produkt und jegliches Zubehör wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, bevor Sie es versenden.

Versenden Sie Ihr Produkt am besten in der Originalverpackung. Dadurch ist es während des Versands vor Beschädigung geschützt.

Bei Direktversand Ihres Produkts an das von EMS autorisierte Reparaturzentrum geben Sie bitte den Namen Ihres Händlers an. Dies vereinfacht die Bearbeitung.

SERVICIO TÉCNICO DE EMS

Para todos los demás trabajos de mantenimiento o reparación rogamos envíe su producto a su distribuidor o directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS.

Una reparación no autorizada así como los daños derivados de la no observación de las instrucciones de empleo liberan a EMS de cualquier responsabilidad. Esto también invalidará la garantía.



No se puede modificar este equipo de forma alguna.



Antes de enviarlo, limpie, desinfecte y esterilice el producto y todos sus accesorios tal y como se describe en las instrucciones de empleo.

Para el transporte lo mejor es utilizar el embalaje original. Dentro de éste su producto estará protegido de forma óptima contra un transporte incorrecto.

Cuando envíe su producto directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS, indique, por favor, el nombre de su distribuidor. De este modo se facilitará la gestión.

ASSISTENZA EMS

Nel caso il prodotto richieda ulteriore assistenza o riparazioni, inviarlo al rivenditore o direttamente al centro assistenza EMS autorizzato.

Nel caso di riparazioni non autorizzate o danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, EMS declina qualsiasi responsabilità in merito e ne renderà nulla la garanzia.



Non è ammessa alcuna modifica della presente apparecchiatura.



Prima della spedizione pulire, disinfettare e sterilizzare il prodotto e tutti i suoi accessori come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Si consiglia di spedire il prodotto nel suo imballo originale. In questo modo sarà protetto da danni durante la spedizione.

Quando si spedisce il prodotto direttamente a un centro di assistenza EMS autorizzato, specificare il nome del proprio rivenditore per semplificare il processo.

EMS-SERVICE

Om produkten behöver underhåll eller reparation ska den sändas till återförsäljaren eller direkt till ett EMS-auktoriserat serviceställe.

Icke-auktoriserad reparation eller skada som uppkommit på grund av att bruksanvisningen inte följts befriar EMS från allt ansvar. Dessutom upphör garantin att gälla.



Inga ändringar av denna utrustning medges.



Produkten och alla tillbehör ska rengöras, desinficeras och steriliseras i enlighet med bruksanvisningarna innan de returneras.

Använd helst originalförpackningen vid transport. Det ger bäst skydd mot transportskador.

Skickar du produkten direkt till ett EMS-auktoriserat serviceställe ber vi dig ange återförsäljarens namn och adress. Detta underlättar hanteringen.

SYMBOLS

SYMBOLES

SYMBOLE

	Manufacturer's logo Logo du fabricant Herstellerlogo
	Caution! Read the operating instructions Attention! Veuillez lire le mode d'emploi Achtung! Siehe Bedienungsanleitung
	Applied part, type BF Partie appliquée du type BF Zur Anwendung am Patienten, Typ BF
	Power switch "ON" Interrupteur général "ON" Netzschalter „EIN“
	Power switch "OFF" Interrupteur général "OFF" Netzschalter „AUS“
	Manufacturer Fabricant Hersteller
	Year of manufacture Année de fabrication Herstellungsjahr
	Fuse Fusible Sicherung

	Logotipo de fabricante Logo del produttore Tillverkarens logotyp
	¡Precaución! Ver instrucciones de empleo Attenzione! Leggere le istruzioni per l'uso Försiktighet! Läs användningsinstruktionerna
	Pieza de aplicación tipo BF Parte applicata, tipo BF Tillämpad del, typ BF
	Interruptor de alimentación "ON" Interruttore di accensione "ON" Strömbrytare "PÅ"
	Interruptor de alimentación "OFF" Interruttore di spegnimento "OFF" Strömbrytare "AV"
	Fabricante Produttore Tillverkare
	Año de fabricación Anno di produzione Tillverkningsår
	Fusible Fusibile Säkring

	Input Entrée Eingang
	Output Sortie Ausgang
Impulse preset	Adjustment of number of pulses Réglage du nombre d'impulsion Einstellung der Impulszahl
Hz	Working frequency Fréquence de travail Arbeitsfrequenz
bar	Pressure setting Pression d'air Druckluft
Air pressure	Air pressure setting Réglage de la pression d'air Einstellung der Druckluft

	Entrada Ingresso Ingång
	Salida Uscita Utgång
Impulse preset	Ajuste del número de impulsos Regolazione del numero degli impulsi Reglage för pulsantal
Hz	Frecuencia de trabajo Frequenza di esercizio Arbetsfrekvens
bar	presión de aire pressione dell'aria Lufta pressar
Air pressure	Ajuste de la presión de aire Regolazione della pressione dell'aria Luftrycksinställning

	Equipotential plug Prise équipotentielle Potenzialausgleichsstecker
	Catalogue number Numéro de référence Katalognummer
	Serial number Numéro de série Seriennummer
	After sales service only Service après vente uniquement Nur After-Sales-Service
	After sales service only Service après vente uniquement Nur After-Sales-Service
	CE marking: Refers to directive 93/42 EEC, including EN 60601-1 and EN 60601-1-2 Marquage de conformité CE : Se rapporte à la directive 93/42 CEE, y compris EN 60601-1 et EN 60601-1-2 CE-Kennzeichen: Bezieht sich auf die Richtlinie 93/42 EWG, einschliesslich EN 60601-1 und EN 60601-1-2
	Follow instructions for use Suivre les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten
	GOST R marking with Certification Body registration number for products in conformance with Russian standards GOST R marquage avec le numéro d'organisme de certification pour les produits conformes aux exigences russes GOST R-Kennzeichen mit Registrierungsnummer der zertifizierenden Stelle für Produkte, die den russischen Normen entsprechen

	Enchufe equipotencial Nodo equipotenziale Ekvipotentiell kontakt
	Número de catálogo Numero di catalogo Katalognummer
	Número de serie Numero di serie Serienummer
	Solo servicio posventa Solo servizio di assistenza post-vendita Endast service efter försäljning
	Solo servicio posventa Solo servizio di assistenza post-vendita Endast service efter försäljning
	Marcación de conformidad CE: hace referencia a la norma 93/42 CEE, inclusive EN 60601-1 y EN 60601-1-2 Marchio CE: si riferisce alla direttiva 93/42 CEE, inclusa la EN 60601-1 e EN 60601-1-2 CE-märkning: Se direktiv 93/42/EEC, inklusive EN 60601-1 och EN 60601-1-2
	Siga las instrucciones de uso Attenersi alle istruzioni per l'uso Följ bruksanvisningen
 AE68	Marcación GOST R con número del registro del organismo de certificación para productos conformes con las normas de Rusia Marchio GOST R con numero di registrazione dell'ente di certificazione per prodotti ai sensi delle normative russe. GOST R-märkning med certifikatregistreringsnummer för produkter i enlighet med ryska normer.



CSA marking with "C" identification for products in conformance with Canadian standards and "US" for products in conformance with US standards

Marquage CSA avec identification "C" pour produit conforme aux normes Canadiennes et "US" pour produit conforme US

CSA-Kennzeichen, wobei „C“ für Produkte steht, die den kanadischen Normen entsprechen, und „US“ für Produkte, die den US-amerikanischen Normen entsprechen



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Traitements des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

	Marca CSA con identificación "C" para productos conformes con las normas de Canadá y "US" para productos conformes con las normas de los EE. UU. Marchio CSA con l'identificazione "C" per prodotti in conformità con gli standard canadesi e statunitensi per prodotti conformi agli standard statunitensi CSA-märkning med identifikationen "C" för produkter som motsvarar kanadensiska normer och "US" för produkter som motsvarar amerikanska normer
	Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) Smaltimento di apparecchiature elettriche e elettroniche usate (nell'Unione Europea e in altre nazioni europee con sistemi di raccolta differenziati) Omhändertagande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

TECHNICAL DATA

Description

Manufacturer	EMS SA, CH-1260 Nyon, Switzerland
Model	SWISS DOLORCLAST® smart
Classification EN 60601-1	Class I IP 20, unit Mode: Continuous operation
Applied part, Type BF	Swiss DolorClast handpiece
Classification 93 / 42 EEC	Class IIb
Supply voltage	100 V AC / 240 V AC
Mains frequency	50 - 60 Hz
Power consumption	40 VA
Fuses	Ø 5 x 20 mm, 250 V AC, time lag (Phase and Neutral) T 2.5 A L
Compressed air supply	5 - 6 bar (5000 - 6000 hPa) 20 ml/min at 4 bar
Operating mode	Multiple pulse mode repetition rate: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Operating pressure	1.5 - 4 bar
Weight	Approx. 2.9 kg
Dimensions in mm (HxWxD)	108 x 280 x 300
Operating conditions	+10°C to +40°C 30% to 75% relative humidity
Storage and transport conditions	-10°C to +40°C 10% to 95% relative humidity 500 hPa to 1060 hPa air pressure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description

Fabricant	EMS SA, CH-1260 Nyon, Suisse
Modèle	SWISS DOLORCLAST® smart
Classification EN 60601-1	Class I IP 20, appareil Mode de fonctionnement: Service continu
Partie appliquée du type BF	Pièce à main Swiss DolorClast
Classification 93 / 42 CEE	Classe IIb
Tension de l'alimentation	100 V AC / 240 V AC
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance nominale	40 VA
Fusibles	Ø 5 x 20 mm, 250 V AC, temporisés (Phase et Neutre) T 2.5 A L
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar (5000 - 6000 hPa) 20 ml/min à 4 bar
Mode de travail	Mode d'impulsions continues Fréquence de répétition: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Pression de travail	1,5 - 4 bar
Poids	Approx. 2.9 kg
Dimensions en mm (HxLxP)	108 x 280 x 300
Conditions de fonctionnement	+10° C à +40° C 30% à 75% d'humidité relative
Conditions de stockage et de transport	-10 °C à +40 °C 10% à 95% d'humidité relative Pression atm. 500 hPa à 1060 hPa

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung

Hersteller	EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz
Modell	SWISS DOLORCLAST® smart
Klassifikation EN 60601-1	Klasse I IP 20, Gerät Modus: kontinuierlicher Betrieb
Zur Anwendung am Patienten, Typ BF	Swiss DolorClast Handstück
Klassifikation 93 / 42 EG	Klasse IIb
Versorgungsspannung	100–240 VAC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	40 VA
Sicherungen	Ø 5 x 20 mm, 250 V AC, träge (Phase und Neutral) T 2.5 A L
Druckluftversorgung	5–6 bar (5000–6000 hPa) 20 ml/Min. bei 4 bar
Betriebsart	Dauerimpulsbetrieb Wiederholfrequenz: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Arbeitsdruck	1,5 - 4 bar
Gewicht	etwa 2,9 kg
Abmessungen in mm (HxBxT)	108 x 280 x 300
Betriebsbedingungen	+10 °C bis + 40 °C 30 % bis 75 % rel. Feuchte
Lager- und Transportbedingungen	-10 °C bis + 40 °C 10 % bis 95 % rel. Feuchte Luftdruck 500 hPa bis 1060 hPa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Denominación

Fabricante	EMS SA, CH-1260 Nyon, Suiza
Modelo	SWISS DOLORCLAST® smart
Clasificación EN 60601-1	Clase I IP 20, aparato Modo de utilización: continuo
Pieza de aplicación tipo BF	Mango Swiss DolorClast
Clasificación 93 / 42 CEE	Clase IIb
Tensión de alimentación	100 VAC / 240 VAC
Frecuencia de la red	50 - 60 Hz
Potencia nominal	40 VA
Fusibles	Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, retardo (fase y neutral) T 2.5 A L
Red de aire comprimido	5 - 6 bar (5.000 - 6.000 hPa) 20 ml/min a 4 bar
Modo de funcionamiento	Modo de impulso continuo Rango de repetición: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Presión de trabajo	1,5 - 4 bar
Peso	Aprox. 2,9 kg
Dimensiones en mm (alto x ancho x profundo)	108 x 280 x 300
Condiciones de funcionamiento	+10 °C hasta +40 °C 30% hasta 75% humedad relativa
Condiciones de almacenamiento y transporte	-10 °C hasta +40 °C 10% hasta 95% humedad relativa Presión atm. 500 hPa hasta 1.060 hPa

DATI TECNICI

Descrizione

Produttore	EMS SA, CH-1260 Nyon, Svizzera
Modello	SWISS DOLORCLAST® smart
Classifica EN 60601-1	Classe I IP 20, unità Modalità: funzionamento continuo
Parte applicata, tipo BF	Manipolo Swiss DolorClast
Classificazione 93/42 CEE	Classe IIb
Tensione di alimentazione	100 V AC / 240 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Consumo di corrente	40 VA
Fusibili	Ø 5 x 20 mm, 250 V AC, ritardo temporale (fase e neutro) T 2.5 A L
Alimentazione di aria compressa	5 - 6 bar (5000 - 6000 hPa) 20 ml/min a 4 bar
Modalità di esercizio	Modalità a impulsi multipli tasso di ripetizione: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Pressione di esercizio	1,5 - 4 bar
Peso	2,9 kg circa
Dimensioni in mm (AxLxP)	108 x 280 x 300
Condizioni operative	Da +10° C a +40° C Da 30% a 75% di umidità relativa
Condizioni di conservazione e di trasporto	Da -10° C a +40° C Da 10% a 95% di umidità relativa Da 500 hPa a 1060 hPa di pressione dell'aria

TEKNISKA DATA

Beskrivning

Tillverkare	EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz
Modell	SWISS DOLORCLAST® smart
Klassifikation EN 60601-1	Klass I IP 20, apparat Läge: Kontinuerlig drift
Tillämpad del, typ BF	Swiss DolorClast handdel
Klassifikation 93/42 EEC	Klass IIb
Nätspänning	100 VAC / 240 VAC
Nätfrekvens	50 - 60 Hz
Strömförbrukning	40 VA
Säkringar	Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, tidsfördröjning (fas och neutral) T 2.5 A L
Tryckluftsförsörjning	5 - 6 bar (5000 - 6000 hPa) 20 ml/min vid 4 bar
Driftsläge	Flerpulslägets repetitionsfrekvens: 4 - 6 - 8 - 10 Hz
Driftstryck	1,5 - 4 bar
Vikt	Ca 2,9 kg
Mått i mm (HxBxD)	108 x 280 x 300
Användningsförhållanden	+10 °C till +40 °C 30 % till 75 % relativ luftfuktighet
Förvarings- och transportvillkor	-10 °C till +40 °C 10 % till 95 % relativ luftfuktighet 500 hPa till 1060 hPa lufttryck

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

 This product needs special precautions regarding electromagnetic compatibility and needs to be installed and put into service according to the note "Electromagnetic compatibility".

 Certain types of mobile telecommunication equipment could potentially interfere with this product. The separation distances recommended in the note "Electromagnetic compatibility" must be taken into account.

 This product should not be used adjacent to or stacked with another unit. If adjacent or stacked use is necessary, this product should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

 The use of accessories and cables other than those specified or sold by EMS as replacement parts, may result in increased emissions or decreased immunity of this product.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNETIQUE

 Ce produit nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique. Il doit être installé et mis en service selon la notice "Compatibilité Électromagnétique".

 Certains types d'appareils mobiles de télécommunication sont susceptibles d'interférer avec ce produit. Les distances de séparation recommandées dans la notice "Compatibilité Électromagnétique" doivent être respectées.

 Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre appareil ou empilé sur ce dernier. Si cette configuration ne peut être évitée, il est impératif avant l'utilisation de vérifier son bon fonctionnement dans les conditions d'utilisation.

 L'utilisation d'accessoires ou de câbles autres que ceux spécifiés ou vendus par EMS comme pièces de remplacement, peut avoir comme conséquence une augmentation de l'émission ou une diminution de l'immunité de ce produit.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

 Für dieses Produkt sind im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit spezielle Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Es muss daher in Übereinstimmung mit der Notiz „Elektromagnetische Verträglichkeit“ installiert und in Betrieb genommen werden.

 Bestimmte Typen mobiler Funkkommunikationsgeräte können das Funktionieren dieses Produkts beeinträchtigen. Die empfohlenen räumlichen Entfernungen müssen gemäss der Notiz „Elektromagnetische Verträglichkeit“ eingehalten werden.

 Dieses Produkt darf nicht in der Nähe eines anderen Geräts verwendet oder darauf gestapelt werden. Ist dies nicht zu vermeiden, muss die Funktion des Gerätes in dieser Konfiguration vor Benutzung geprüft werden.

 Der Gebrauch anderer Zubehörteile oder Kabel, die nicht von EMS empfohlen oder als Ersatzteile geliefert werden, kann zu verstärktem Senden oder verringerter Störfestigkeit dieses Produktes führen.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

 Este producto necesita precauciones especiales referentes a la compatibilidad electromagnética y necesita ser instalado y puesto en servicio según la guía "Compatibilidad electromagnética".

 Determinados tipos de equipos de telecomunicaciones móviles pueden interferir potencialmente con este producto. Se deben tener en cuenta las distancias de separación recomendadas en la guía "Compatibilidad electromagnética".

 Este producto no se debe utilizar al lado o apilado con otro aparato. Si es necesario el uso adyacente o apilado se debe verificar que el producto funcione normalmente en esa configuración.

 El uso de accesorios y cables distintos a los especificados o vendidos por EMS como piezas de repuesto puede dar lugar a un aumento de las emisiones o a la reducción de la inmunidad de este producto.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

 Questo prodotto richiede speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e va installato e messo in funzione ai sensi della nota "Compatibilità elettromagnetica".

 Certi tipi di apparecchiature di telecomunicazione mobili potrebbero potenzialmente interferire con questo prodotto. Prendere in considerazione le distanze di separazione consigliate nella nota "Compatibilità elettromagnetica".

 Questo prodotto non può essere utilizzato accanto ad un'altra unità o impilato. Se fosse necessario un utilizzo ravvicinato o impilato, questo prodotto dovrà essere monitorato per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.

 L'utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati o venduti da EMS come parti di ricambio può comportare un aumento di emissioni o una immunità diminuita di questo prodotto.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

 Denna produkt kräver särskild försiktighet avseende elektromagnetisk kompatibilitet och måste installeras och tas i drift enligt anvisningarna "Elektromagnetisk kompatibilitet".

 Vissa typer av mobiltelekommunikationsutrustning kan eventuellt störa denna produkt. Hänsyn måste tas till de avstånd som rekommenderas i anvisningarna "Elektromagnetisk kompatibilitet".

 Denna produkt ska inte användas i närheten eller staplad ovanpå annan utrustning. Om detta inte kan undvikas måste användaren kontrollera att produkten fungerar normalt i den konfiguration som den ska användas i.

 Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificeras eller säljs av EMS som reservdelar kan resultera i ökad emission eller minskad hållbarhet för produkten.

TROUBLESHOOTING

The DolorClast smart provides an error code system in case of malfunction or incorrect handling:

1 LED blinking = Handpiece error; 2 LEDs blinking = Air pressure error; 3 LEDs blinking = Software error

Symptom	Error code	Solutions
The display does not light up when the unit is switched on	--	• Check the different electrical connections • Check the mains electricity supply • Check/replace the fuses and replace them with the type indicated on the back of the unit • Send the unit to your authorized EMS repair center
The display is blinking when the unit is switched on	--	• Send the unit to your authorized EMS repair center
Handpiece error	1 LED	• Check the different connections of the unit • Check the connection of the handpiece • Test the unit with another handpiece
Air pressure error	2 LEDs	• Check the different air connections • Check the air pressure supply is within the values indicated on the back of the unit • Check the compressor • Check the connection between the handpiece and unit • Test the unit with another handpiece • Send the unit to your authorized EMS repair center
Pressure not adjustable	--	• Switch OFF/ON the unit • Check the different air connections • Check the air pressure supply is within the values indicated on the back of the unit • Check the compressor • Send the unit to your authorized EMS repair center
Pressure reduction during operation	Repetitive "beep"	• Check the different air connections • Check the compressed air supply • Contact your authorized EMS repair center
Software error	3 LEDs	• Send the unit to your authorized EMS repair center

DÉPANNAGE

Le DolorClast smart indique un code d'erreur en cas de panne ou d'utilisation incorrect.

1 LED = Erreur pièce à main; 2 LEDs = Erreur pression d'air; 3 LEDs = Erreur logiciel

Dysfonctionnement	Code erreur	Solutions
L'affichage ne s'allume pas lors de la mise en marche de l'appareil	--	• Vérifier les connexions électriques • Vérifier l'alimentation électrique du cabinet • Vérifier les fusibles et remplacez les uniquement par le type de fusible indiqué au dos de l'appareil • Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé
L'affichage clignote lors de la mise en marche de l'appareil	--	• Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé
Erreur pièce à main	1 LED	• Vérifier les différentes connexions de l'appareil • Vérifier la connexion de la pièce à main • Tester l'appareil avec une autre pièce à main
Erreur pression d'air	2 LEDs	• Vérifier les différentes connexions air • Vérifier que la pression d'air disponible sur l'appareil soit entre les valeurs indiquées à l'arrière de l'appareil • Vérifier le compresseur • Vérifier la connexion entre la pièce à main et l'appareil • Tester l'appareil avec une autre pièce à main • Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé
Pression non réglable	--	• Eteindre "OFF" puis mettre en marche "ON" l'appareil • Vérifier les différentes connexions air • Vérifier que la pression d'air disponible sur l'appareil soit entre les valeurs indiquées à l'arrière de l'appareil • Vérifier le compresseur • Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé
Réduction de pression pendant l'utilisation	Un "bip" répétitif	• Vérifier les différentes connexions air • Vérifier l'alimentation en air comprimé • Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé
Erreur logiciel	3 LEDs	• Envoyer l'appareil à un centre de réparation EMS agréé

FEHLERBESEITIGUNG

Für den Fall einer Fehlfunktion oder eines Bedienungsfehlers ist das DolorClast smart mit einem Fehlercode-System ausgestattet.

1 LED blinkt = Fehler am Handstück; 2 LEDs blinken = Fehler bei der Druckluft; 3 LEDs blinken = Softwarefehler

Fehler	Fehlercode	Abhilfe
Die Anzeige bleibt nach Einschalten des Gerätes dunkel.	--	• Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse. • Überprüfen Sie die Stromversorgung des Behandlungsraums. • Überprüfen Sie die Sicherungen und ersetzen Sie sie ggf. gemäss der auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Typen. • Senden Sie das Gerät an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.
Die Anzeige blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.	--	• Senden Sie das Gerät an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.
Fehler am Handstück	1 LED	• Überprüfen Sie die verschiedenen Anschlüsse an das Gerät. • Überprüfen Sie den Anschluss des Handstücks. • Überprüfen Sie das Gerät mit einem anderen Handstück.
Fehler bei der Druckluft	2 LEDs	• Überprüfen Sie die Druckluftanschlüsse. • Überprüfen Sie, ob die Druckluftversorgung innerhalb der auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Grenzwerte liegt. • Überprüfen Sie den Kompressor. • Überprüfen Sie den Anschluss zwischen Handstück und Gerät. • Überprüfen Sie das Gerät mit einem anderen Handstück. • Senden Sie das Gerät an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.
Druck ist nicht einstellbar.	--	• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. • Überprüfen Sie die Druckluftanschlüsse. • Überprüfen Sie, ob die Druckluftversorgung innerhalb der auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Grenzwerte liegt. • Überprüfen Sie den Kompressor. • Senden Sie das Gerät an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.
Druckminderung während der Behandlung	Wiederholter Signalton	• Überprüfen Sie die Druckluftanschlüsse. • Überprüfen Sie die Druckluftversorgung. • Nehmen Sie Kontakt zu einem von EMS autorisierten Reparaturzentrum auf.
Softwarefehler	3 LEDs	• Senden Sie das Gerät an ein von EMS autorisiertes Reparaturzentrum.

MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE INCIDENTES

DolorClast smart proporciona un sistema de códigos de error en caso de mal funcionamiento o manejo incorrecto:

1 led intermitente = Error del mango; 2 leds intermitentes = Error de la presión del aire; 3 leds intermitentes = Error del software

Síntomas	Código de error	Soluciones
La pantalla no se enciende al poner en marcha el aparato	--	• Compruebe las diferentes conexiones eléctricas • Compruebe la alimentación eléctrica del gabinete • Compruebe/sustituya los fusibles y, en caso necesario, sustitúyalos siempre por el tipo indicado en el dorso del aparato • Envíe el aparato a un centro de reparación autorizado EMS
La pantalla parpadea al poner en marcha el aparato	--	• Envíe el aparato a un centro de reparación autorizado EMS
Error del mango	1 led	• Compruebe las diferentes conexiones del aparato • Compruebe la conexión del mango • Pruebe el aparato con otro mango
Error de la presión del aire	2 leds	• Compruebe las diferentes conexiones de aire • Compruebe que el suministro de presión de aire está dentro de los valores indicados en el dorso del aparato • Compruebe el compresor • Compruebe la conexión entre el mango y el aparato • Pruebe el aparato con otro mango • Envíe el aparato a un centro de reparación autorizado EMS
Presión no regulable	--	• Apague y encienda el aparato • Compruebe las diferentes conexiones de aire • Compruebe que el suministro de presión de aire está dentro de los valores indicados en el dorso del aparato • Compruebe el compresor • Envíe el aparato a un centro de reparación autorizado EMS
Bajada de presión durante la utilización	pitidos repetidos	• Compruebe las diferentes conexiones de aire • Compruebe el suministro de aire comprimido • Contacte con nuestro centro de reparación autorizado EMS
Error del software	3 leds	• Envíe el aparato a un centro de reparación autorizado EMS

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DolorClast smart fornisce un sistema di codici di errore in caso di guasto o errata manipolazione:

Lampeggiamento di 1 LED = errore del manipolo ; lampeggiamento di 2 LED = errore di pressione dell'aria; lampeggiamento di 3 LED = errore software

Sintomo	Codice di errore	Soluzioni
Il display non si accende quando l'unità viene accesa	--	• Controllare i vari collegamenti elettrici • Controllare l'alimentazione elettrica della corrente di rete • Controllare/sostituire i fusibili con fusibili del tipo indicato sul retro dell'unità • Inviare l'unità al centro di assistenza EMS autorizzato
Il display lampeggia quando l'unità viene accesa.	--	• Inviare l'unità al centro di assistenza EMS autorizzato.
Errore manipolo	1 LED	• Controllare i vari collegamenti dell'unità • Controllare i collegamenti del manipolo • Testare l'unità con un altro manipolo
Errore di pressione dell'aria	2 LED	• Controllare le varie connessioni dell'aria • Controllare che l'alimentazione della pressione dell'aria rientri nei valori indicati sul retro dell'unità • Controllare il compressore • Controllare il collegamento fra il manipolo e l'unità • Testare l'unità con un altro manipolo • Inviare l'unità al centro di assistenza EMS autorizzato
Pressione non regolabile	--	• Accendere/spengere l'unità • Controllare le varie connessioni dell'aria • Controllare che l'alimentazione della pressione dell'aria rientri nei valori indicati sul retro dell'unità • Controllare il compressore • Inviare l'unità al centro di assistenza EMS autorizzato
Riduzione di pressione durante il funzionamento	"Beep" ripetuti	• Controllare le varie connessioni dell'aria • Controllare l'alimentazione dell'aria compressa • Rivolgersi al centro assistenza EMS autorizzato
Errore software	3 LED	• Inviare l'unità al centro di assistenza EMS autorizzato

FELSÖKNING

DolorClast smart tillhandahåller ett felkodssystem i händelse av felfunktion eller felaktig hantering:

1 lysdiod blinkar = fel på handdel; 2 lysdioder blinkar = lufttrycksfel; 3 lysdioder blinkar = programfel

Symtom	Felkod	Lösningar
Displayen är fortfarande mörk efter start	--	• Kontrollera de olika anslutningarna till elnätet • Kontrollera elnätet • Använd endast den typ av säkring som anges på apparatens baksida • Skicka apparaten till ett av EMS-auktoriserat serviceställe
Displayen blinkar fortfarande efter start	--	• Skicka apparaten till ett av EMS godkänt serviceställe
Fel på handdel	1 lysdiod	• Kontrollera de olika anslutningarna till apparaten • Kontrollera anslutningen till handdelen • Testa apparaten med en annan handdel
Lufttrycksfel	2 lysdioder	• Kontrollera de olika luftanslutningarna • Kontrollera att tryckluftsförsörjningen ligger inom de angivna värdena på apparatens baksida • Kontrollera kompressorn • Kontrollera anslutningen mellan handdelen och apparaten • Testa apparaten med en annan handdel • Skicka apparaten till ett EMS-auktoriserat serviceställe
Trycket kan inte justeras	--	• Sätt PÅ/Stäng AV apparaten • Kontrollera de olika luftanslutningarna • Kontrollera att tryckluftsförsörjningen ligger inom de angivna värdena på apparatens baksida • Kontrollera kompressorn • Skicka apparaten till ett EMS-auktoriserat serviceställe
Minskat tryck under drift	Upprepade «pip»	• Kontrollera de olika luftanslutningarna • Kontrollera tryckluftsförsörjningen • Kontakta ett EMS-auktoriserat serviceställe
Programfel	3 lysdioder	• Skicka apparaten till ett EMS-auktoriserat serviceställe

EMS Electro Medical Systems SA

Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon
SWITZERLAND
Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
e-mail: welcome@ems-ch.com

EMS worldwide offices (medical)

FRANCE
EMS France Sarl
23, Av. Louis Bréguet
Immeuble Santos Dumont, Bâtiment D
F-78140 Vélizy Villacoublay
Tél. +33 1 34 58 03 80
Fax +33 1 34 58 03 90
e-mail: info@ems-france.fr

ITALY
EMS Italia S.p.a
Via Faravelli 5
I-20149 Milano
Tel. +39 02 3453 8075
Fax +39 02 3453 1724
e-mail: medical@ems-italia.it

USA/CANADA
EMS Corporation
11886 Greenville Avenue #120
Dallas, TX 75243, USA
Tel. +1 972 690 83 82
Fax +1 972 690 89 81
e-mail: info@ems-medicalamerica.com

GERMANY
EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
D-81829 München
Tel. +49 89 42 71 61 0
Fax +49 89 42 71 61 60
e-mail: info@ems-ch.de

SPAIN
EMS Electro Medical Systems España SL
Bernardino Obregón 14 bis
E-28012 Madrid
Tlf. +34 91 528 99 89
Fax +34 91 539 34 89
e-mail: ems-es@arrakis.es

WWW.EMS-SWISSQUALITY.CH